



浙江奥奇医用敷料有限公司 产品介绍



PU膜胶布

应用场景



固定膏药



固定针头



伤口护理




游泳不透水



洗澡不透水


六大特点

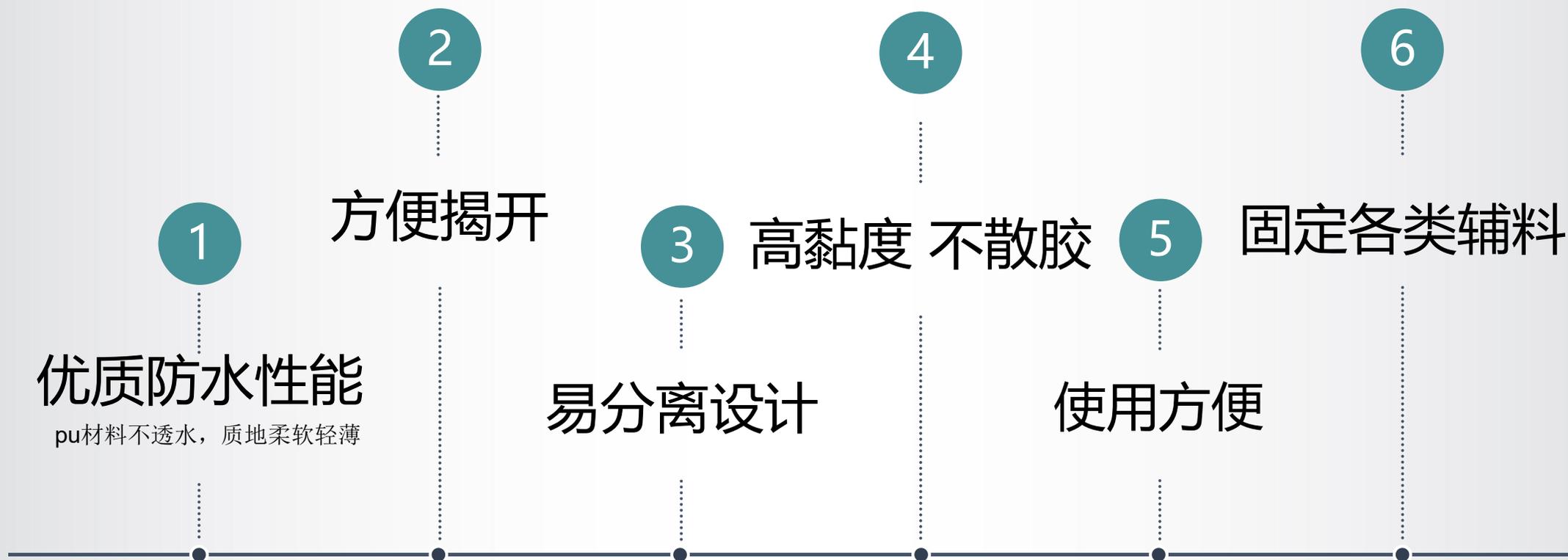

产品名称：PU膜胶布

产品规格：卷材：5cm*10m.10cm*10m.
15cm*10m.20cm*10m.

产品材质：聚氨酯薄膜压敏胶隔离纸

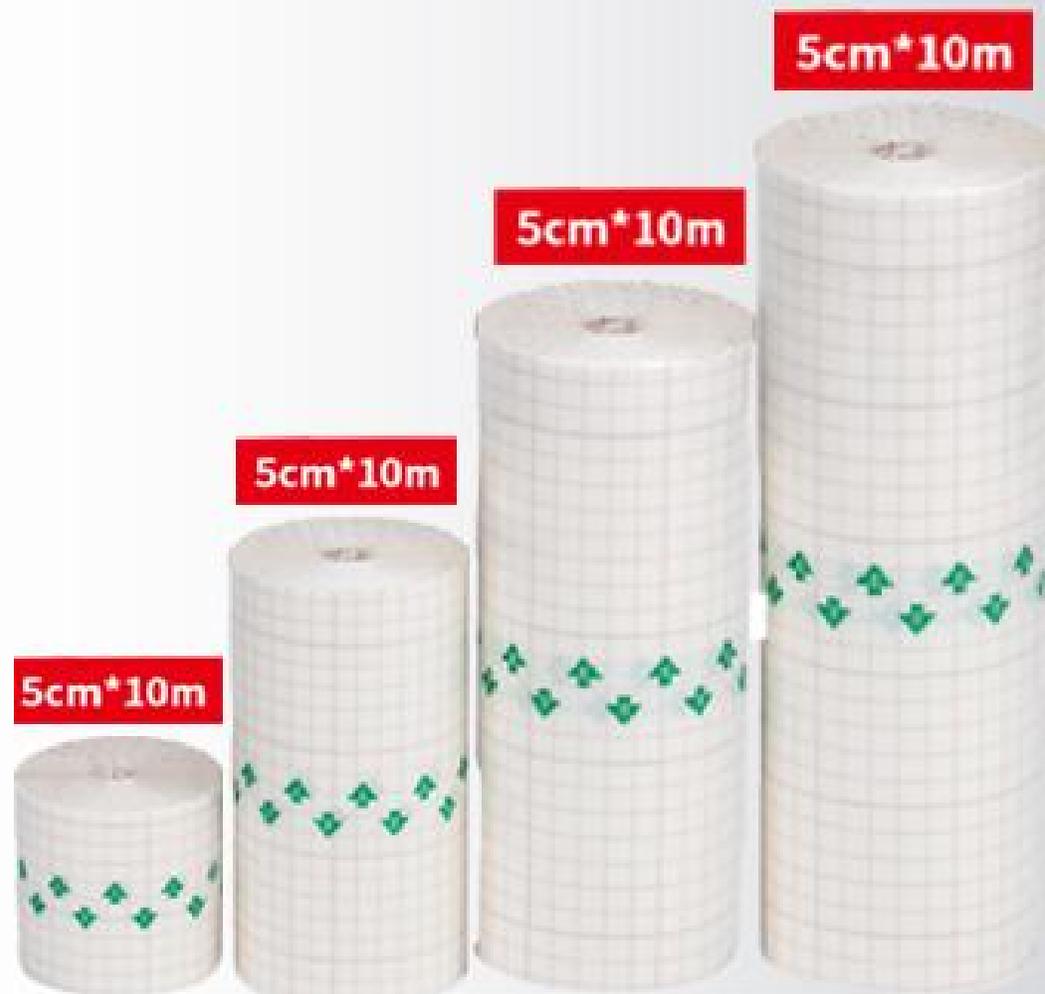




放大细节



产品认证



- 自主研发
- 多重认证
- 具有良好的临床实用性
- 国内外认证值得拥有的医用产品

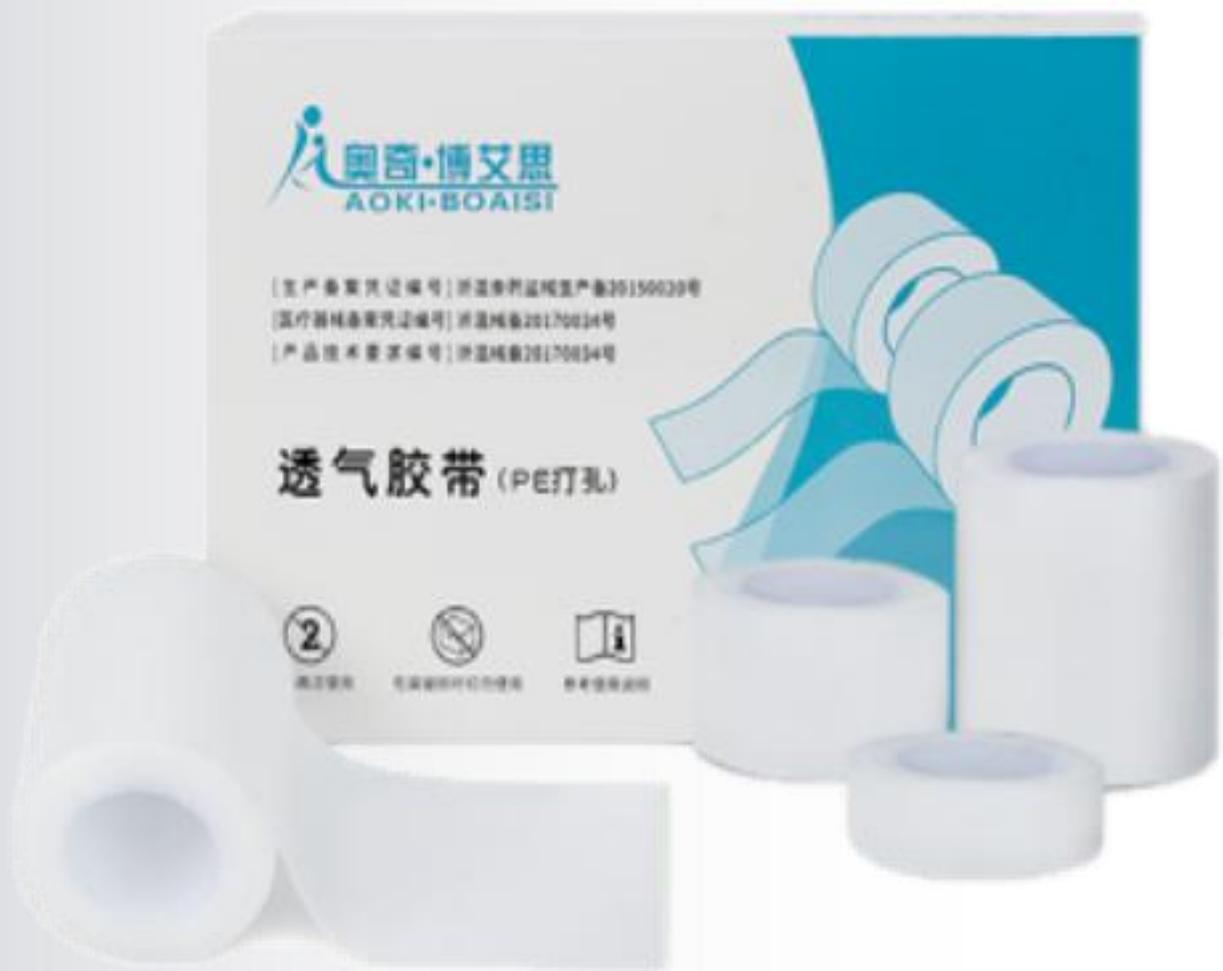

PE打孔
透气胶带

透气胶带可用于手指、双眼皮、手腕、腿部等，是您的常备品。



导管固定



固定针头



家庭必备单品



手术创纱



双眼皮贴

六大特点

1

低过敏
更亲肤

2

易撕免剪

3

透气胶带

4

延展性佳

5

高黏度
不粘胶

6


尺寸齐全

产品参数

产品特点：透明PE材质,透气、服帖、舒适,可纵横双向撕取,无需裁剪,有效利用不浪费,操作方便,粘性好,固定力强。

适用范围：固定输液管,伤口敷料的包扎固定预防皮肤摩擦、膝盖、胳膊肘、手指等弯曲的地方,双眼皮美目贴,也可护理各种小擦伤、刮伤等。



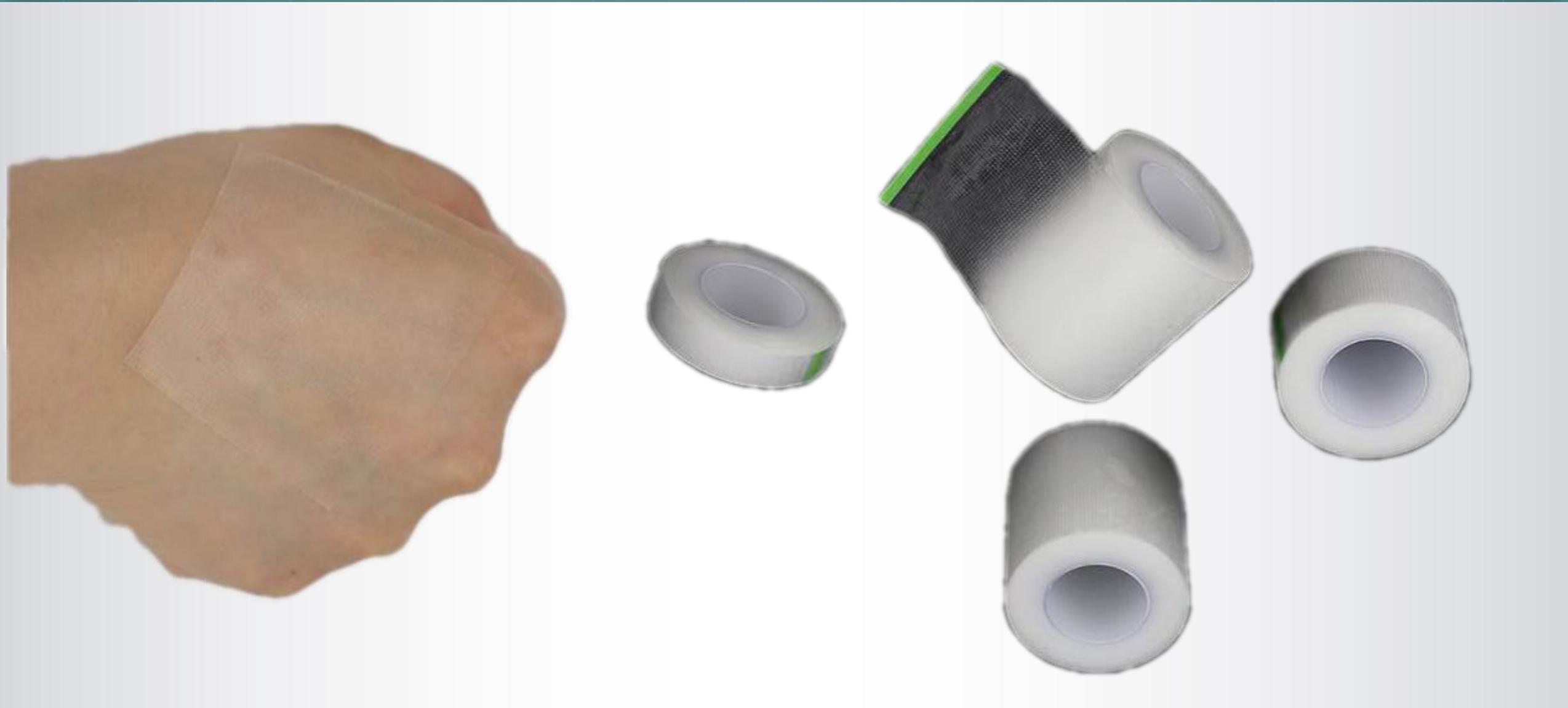

产品认证

第一类医疗器械备案信息表	
备案号：浙温械备 20170034 号	
备案人名称：浙江奥奇医用材料有限公司	
备案人组织机构代码：91330327683147679Y	
备案人注册地址：苍南县龙港镇福桥工业园区	
生产地址：苍南县龙港镇福桥工业园区	
代理人：/	
代理人在浙地址：/	
产品名称：压敏胶带	
型号(规格)	产品按粘性结构不同分为 3 种型号：压敏胶带 (P1 型)、压敏胶带 (P2 型)、压敏胶带 (P3 型)。
产品描述	带状成片粘附材料，分为弹性或非弹性，不与皮肤直接接触，粘附部位为良好皮肤。
预期用途	用于封闭创面敷料、绷带等提供粘附力，以起到固定作用。
备注	
备案单位负责人：/	备案日期：2017 年 09 月 05 日
变更情况	

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用材料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，备案号：浙温械备 20170034 号。

温州市市场监督管理局
(盖章)
备案专用章

日期：2017 年 09 月 05 日

浙江省医疗器械检验中心 医疗器械出厂合格证			
产品名称	压敏胶带	规格型号	压敏胶带 P1 型
产地	浙江省	生产日期	2017 年 09 月 05 日
生产批号	2017090501	有效期至	2017 年 09 月 05 日
出厂检验	合格	检验员	张某某
检验日期	2017 年 09 月 05 日	检验地点	浙江省医疗器械检验中心
检验依据	GB 19880.1-2005	检验结果	合格
备注	本产品符合 GB 19880.1-2005 标准要求，准予出厂。		



PE打孔胶带,医疗器械注册证, 医用级卫生标准质检合格。

检测认证

使用说明书



痘痘贴

Q:约了仰慕的学长
痘痘影响形象怎么办?

A:奥奇祛痘贴来帮你
遮瑕祛痘两不误。

Q:姨妈快来了，
长了好多痘痘怎么办?

A:奥奇祛痘贴来帮你
遮瑕祛痘两不误。

Q:期盼已久的面试
痘痘影响形象怎么办?


A:奥奇祛痘贴来帮你
遮瑕祛痘两不误。

Q:最近火气好大啊，
长了好多痘痘怎么办?


A:奥奇祛痘贴来帮你
遮瑕祛痘两不误。




四大特点

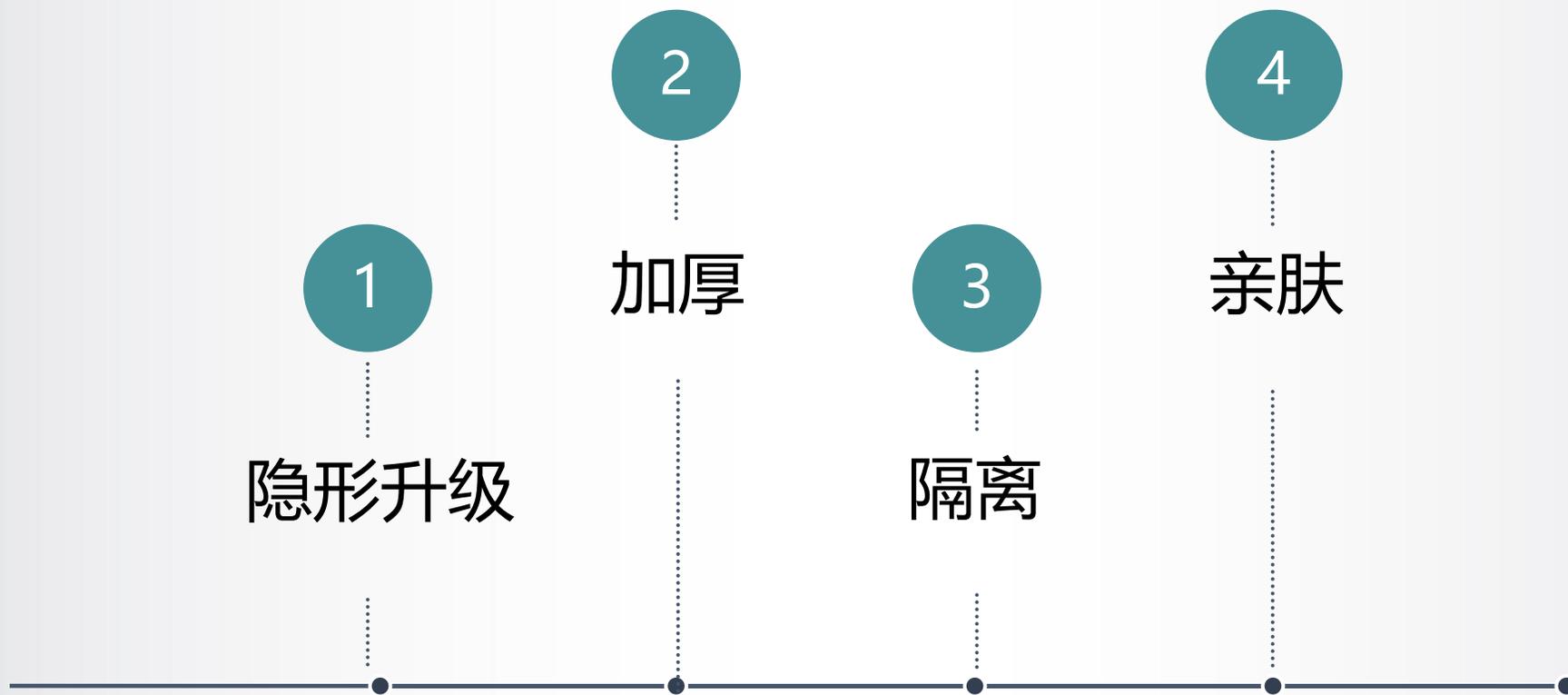


产品规格：

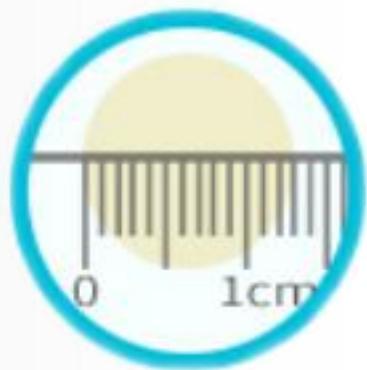

大痘痘贴
1.3cm

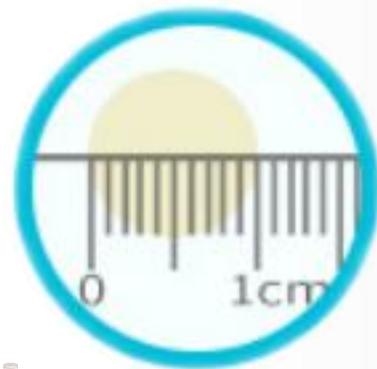

中痘痘贴
1.0cm

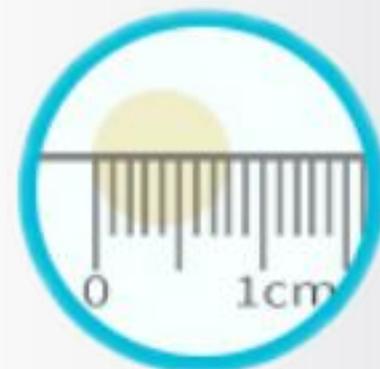

小痘痘贴
0.8cm

产品特点：

全面呵护痘痘肌肤


抗紫外线 防痘印

三种规格满足不同需求

隐形净痘贴净痘原理




痘痘形成

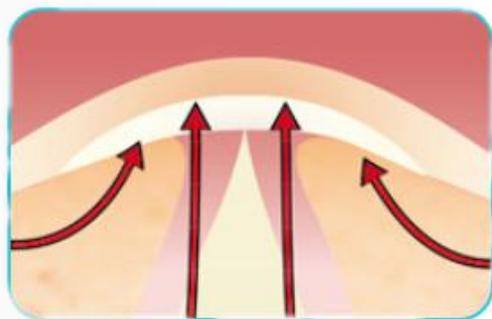

贴上痘痘贴开始吸收




吸收白头后
持续保护避免外部污染

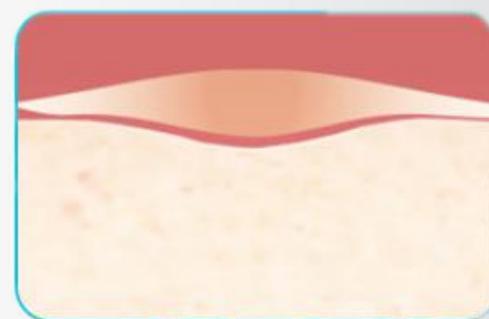

完整保护
常保洁净痘痘好得快

医疗器械注册证

医用级卫生标准质检合格

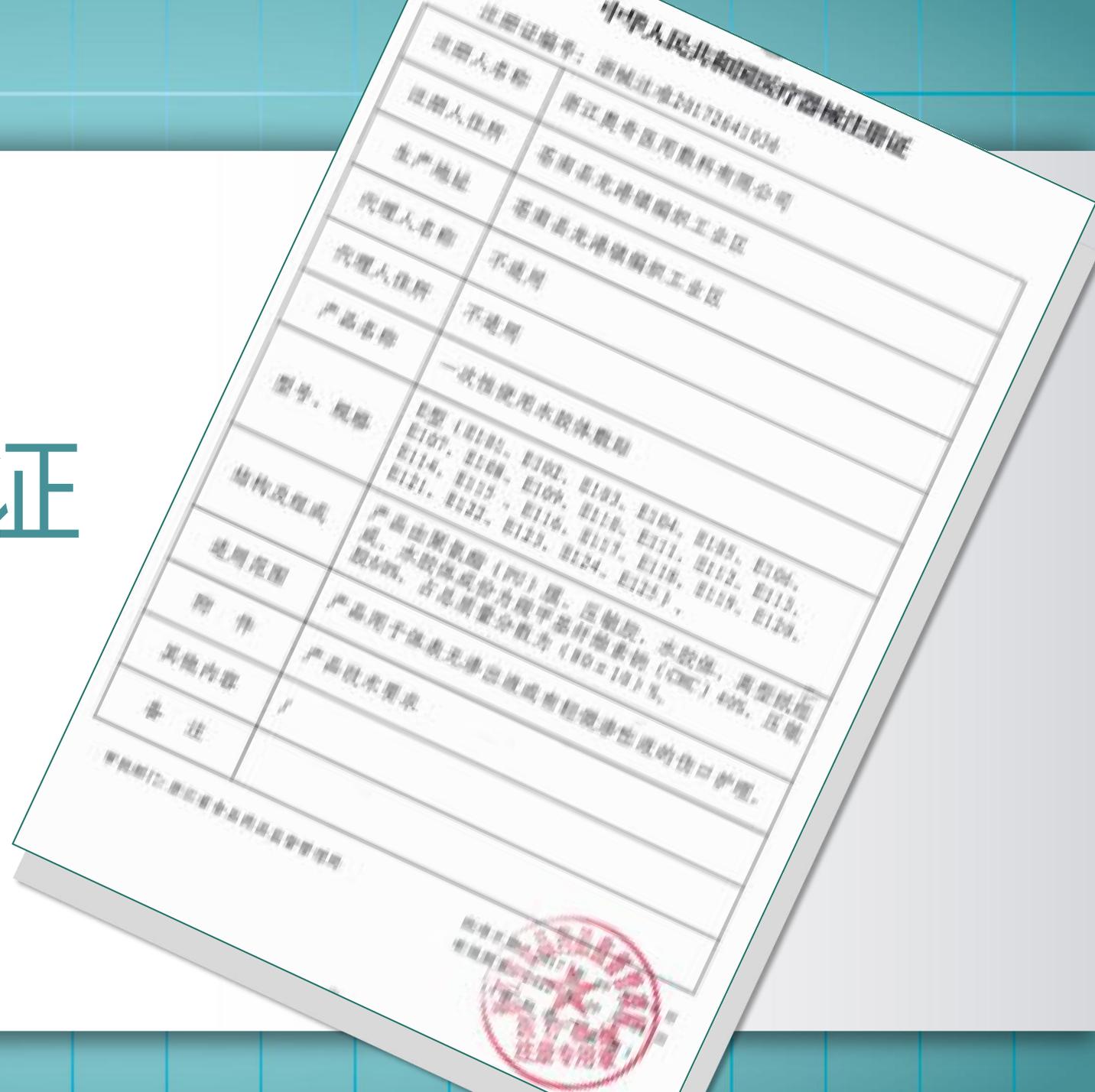



二件式底盘

1.造口袋更换应遵循ARC原则(A佩戴-R揭除-C检查)

A佩戴：正确佩戴产品，确保造口底盘紧密黏贴，防止排泄物渗漏引起皮肤浸渍




- 保证底盘黏贴前的皮肤干净和完全干爽
- 清水清洁皮肤避免使用含有酒精的用品
- 造口底盘中心孔的购教要与造口的尺寸和形状匹配
- 常规使用附件产品预防造口周围皮肤问题



△
附件产品

1.造口袋更换应遵循ARC原则(A佩戴-R揭除-C检查)


R揭除：使用贴胶祛除剂轻柔地揭除底盘，减少对皮肤的损伤

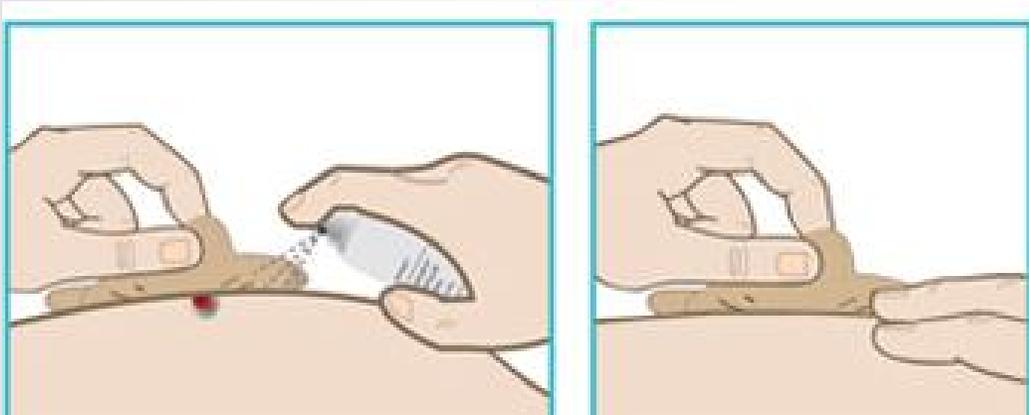

- 规律更换造口袋，轻柔揭除底盘，减少牵拉，保护皮肤免于刺激。
- 底盘下皮肤有痒或灼热等不适感，提示要增加造口袋更换频率。
- 在浸渍出现前和渗润发生前进行造口袋更换。

1.造口袋更换应遵循ARC原则(A佩戴-R揭除-C检查)

C检查

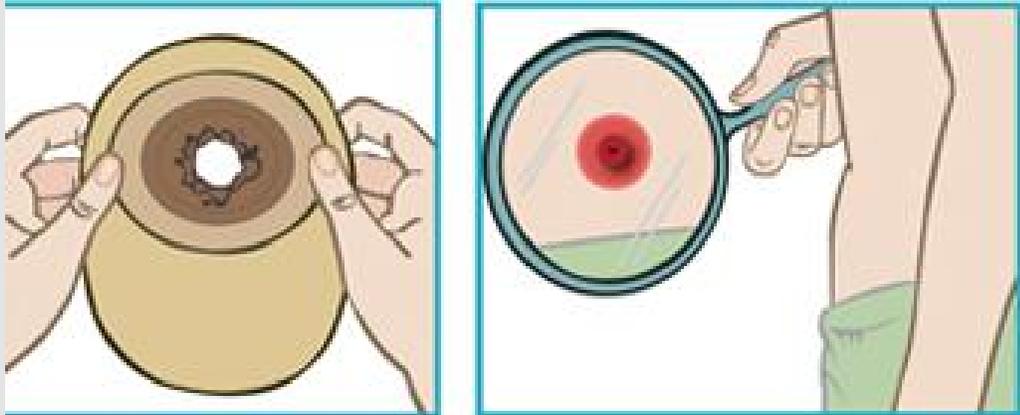

- 检查底盘背面黏胶是否被腐蚀是否有排泄物残留(正常情况底盘应清洁完整)
- 检查造口周围的皮肤是否发红破损(正常情况皮肤应于对侧腹部皮肤颜色一致, 且无损伤)

2.造口袋更换流程

准备所需物品(造口袋及附件产品、剪刀、造口量尺、笔、纸巾、温水等), 使用前用温水清洗造口及周围皮肤并擦干, 保持皮肤清洗干慢。



△
造口袋



△
造口量尺



△
笔、剪刀



△
附件产品



△
温水

使用方法



1、根据造口大小及形状剪孔，剪孔不超过可剪裁范围，开孔直径一般比造口直径大2m左右。



2、撕下粘贴保护纸先除去粘贴保护纸的一边，用另一只手揭开保护纸。



3、安装袋子时，先向袋子内吹少许空气，以防袋子薄膜粘连，然后将剪切好的孔对准造口部分套上，先轻压造口附近皮肤，气温低时可用手按住胶片几分钟，手的压力和温度可使胶片黏贴更加牢固。



4、用封口夹封闭下端开口。



5、卸载：更换造口袋时，一只手按住胶片周围皮肤，另一只手将造口袋轻轻的撕下，如果胶片黏贴太紧密，切不可强拉硬扯以免造成皮肤损伤，可用温水或者皮肤清洗剂进行辅助剥离。

五大特点

椭圆形设计

符合人体力学，更适合腹部形态。

受力点设计

减少张力，不易翘边。



底盘边缘的透明粘胶

水胶体吸盘，具有快速粘贴的特性，同时具有很高的柔韧性，大大降低粘住衣物的可能性。

剪切刻度线

裁剪刻度精确满足个性化造口需求。

揭除手柄设计

便于底盘揭除。

产品名称：二件式造口底盘

产品型号：M701060

材质：医疗热敏水胶体

规格：5片/盒

颜色：透明

包装：连接环径60mm

特点：可搭配腰带



产品名称：二件式造口袋

产品型号：M304060

材质：平纹无纺布/网纹膜/七层阻隔膜

规格：10个/盒

颜色：肤色半透明

规格：连接环径60mm

剪孔：15- -60mm

搭配商品



产品细节

采用医用胶体材料,不易过敏,亲肤舒适,黏贴无残留



采用医用胶体材料

不易过敏,亲肤舒适,黏贴无残留

医疗器械注册证

第一类医疗器械备案信息表

备案号：浙备械备 20190005 号

备案人名称：浙江奥奇医用敷料有限公司
备案人组织机构代码：91330327683142676Y 码上
备案人注册地址：苍南县龙港镇福顺工业园区
生产地址：苍南县龙港镇福顺工业园区
代理人：/
代理人注册地址：/
产品名称：造口袋
型号规格：造口袋型号分六种：(M1型)一件式造口袋开口袋、(M2型)一件式造口袋闭口袋、(M3型)二件式造口袋开口袋、(M4型)二件式造口袋闭口袋、(M5型)一件式原造口袋、(M6型)二件式原造口袋，每个型号分26个规格，具体型号规格见附件。
产品描述：造袋为闭袋、粘袋、在袋或袋底造口的护理器械。产品接触完好，无毒、无刺激性。
预期用途：用于造口护理、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
备注：/
备案单位和日期：/
变更情况：/

检验认证

浙江奥奇医用敷料有限公司

成品检验报告

产品名称	一件式造口袋	规格型号	QD1000	
生产批号	20190123	生产数量	2000个	
灭菌批号	/	抽样数量	10个	
抽样日期	2019年01月23日	检验日期	2019年01月23日	
检验依据	造口袋产品技术要求			
序号	检测项目	技术要求	实测结果	判定
1	外观	造口袋表面应光滑，无毛刺，无异物，符合平整度、符合均勾。	符合要求	合格
2	剥离强度	应不小于0.4N/cm。	0.4N/cm	合格
3	粘粘性	应不大于2.5mm。	0mm	合格
4	密封性	造口袋应密封性能良好，符合牢固，无漏气漏水现象。	符合要求	合格
5	造袋牢固度	造口袋各部件间连接牢固，无漏气漏水现象，应无松动和脱落现象。	符合要求	合格
6	细菌菌落总数	应不大于100cfu/g。	85cfu/g	合格
7	尺寸	±15%以内	15mm	合格
8	材料组成	应由一件式造口袋和二件式造口袋组成。	一件式造口袋	合格
检测结论	合格			

检验员：王健文

使用说明书

**《造口袋》
使用说明书**

【适用范围】
用于造口护理、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。

【产品名称】
造口袋

【规格】
造口袋型号分六种：(M1型)一件式造口袋开口袋、(M2型)一件式造口袋闭口袋、(M3型)二件式造口袋开口袋、(M4型)二件式造口袋闭口袋、(M5型)一件式原造口袋、(M6型)二件式原造口袋，每个型号分26个规格，具体型号规格见附件。

【预期用途】
用于造口护理、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。

【禁忌】
造口袋应密封性能良好，符合牢固，无漏气漏水现象。

【注意事项】
造口袋各部件间连接牢固，无漏气漏水现象，应无松动和脱落现象。

【包装规格】
造口袋型号分六种：(M1型)一件式造口袋开口袋、(M2型)一件式造口袋闭口袋、(M3型)二件式造口袋开口袋、(M4型)二件式造口袋闭口袋、(M5型)一件式原造口袋、(M6型)二件式原造口袋，每个型号分26个规格，具体型号规格见附件。



二件式开口袋

应用场



外出乘车，造口袋脱落、排
泄物渗漏引尴尬



更换频率高，不耐用，增
添经济负担



皮肤被排泄物浸渍，可
能导致红、肿、痒

选择博艾思二件式造口袋的 7大理由

01.

医疗热敏水胶体

采用医用胶体材料,不易
过敏,亲肤舒适,粘贴无残留

热敏水胶体



医疗热敏水设计

02.

平纹无纺布里衬

柔软舒适更贴皮肤,减低摩擦声,
避免造口人士尴尬

无纺布里衬



平纹无纺布里衬

03.

夹扣式封口器

方便随时清理排放排泄物,不易漏.

夹扣式封口器



夹扣式封口器

七大特点

04.

七层阻隔膜

袋体阻隔性薄膜,防止异味,
透明设计易于观察造口及排
泄物状态,不易漏。

七层阻隔膜




七层阻隔膜

05.

弹性卡口,弯腰不怕漏

卡口受弯后,回弹不变形,延长底盘使用寿命,
降低更换频率。

弹性卡口

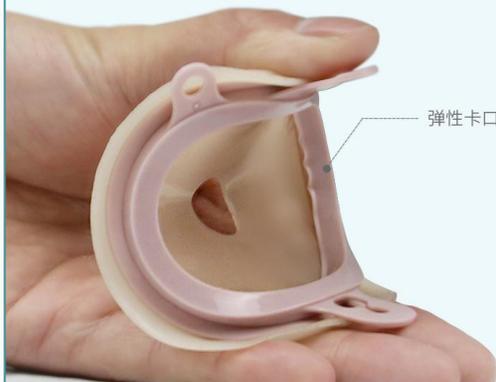

弹性卡扣
弯腰不怕漏

06.

二件式 可单人操作

操作简单,换洗方便



二件式
可单人操作

07. 承重力强

可承重4升矿泉水、不怕挤压、不易漏



承重力强

产品参数

产品名称：二件式造口袋

产品型号：M324(网纹膜) M311(平故布)

材质：平纹无纺布/网纹膜

包装：10个/盒


颜色：肤色半透明

规格：连接环径60mm

剪孔：15 60mm



产品参数

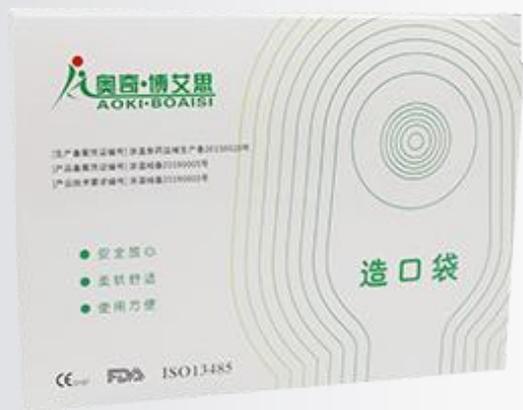

产品包装盒



博艾思一件式开口造口袋



弹性尾夹



使用说明书



造口测量尺



二件式开口袋

产品实拍



透气性好

用途广

粘性强

人性化

无纺布胶带

这些问题无纺布胶布替你解决!



固定足贴



固定膏药



固定针头



固定纱布



紧急包扎

五大特点

为什么选择博艾思**无纺布胶布**?

无纺布胶布**5大卖点**

① 优质医用胶

粘性强,不易留胶,不翘边易撕



② S型切口 方便揭开

正面采用1cm*1cm方格设计,精确裁剪S形切口设计,使用方便,不留残胶在皮肤。



③ 透气型-多孔透气

水利无纺布,微孔结构,透气性好长时间贴敷,不闷皮肤。



④ 高黏度 不散胶

粘性强,不易留胶



⑤ 随意裁剪 使用方便

人性化设计每格1cm



- 高黏度不散胶粘性强不易留胶。
- S型切口方便揭开:正面采用1cm* 1cm方格设计。
- 精确裁剪S形切口设计, 使用方便, 不留残胶在皮肤。
- 透气型多孔透气:水利无坊布微孔结构, 透气性, 好长时间贴敷不闷皮肤。
- 高黏度不散胶粘性强, 不易留胶。
- 随意裁剪使用方便人性化设计每格1cm。




产品参数

产品名称：无纺布胶带。

产品规格：卷材:5cm* 100m, 10cm*100m, 15cm*100m, 20cm*100m。

适用范围：用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。

使用方法：找到离型纸上的切口；
折开离型纸；
将预留离型纸揭下，贴平；
揭下剩余离型纸。

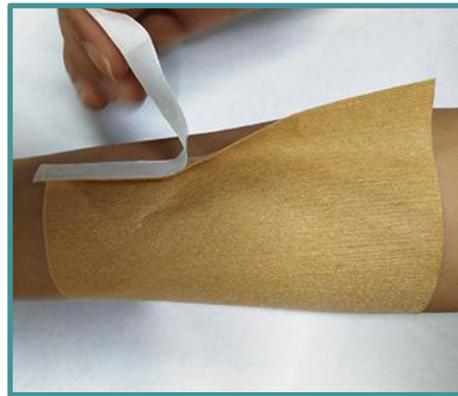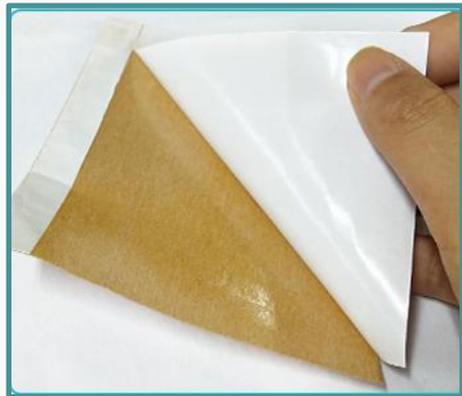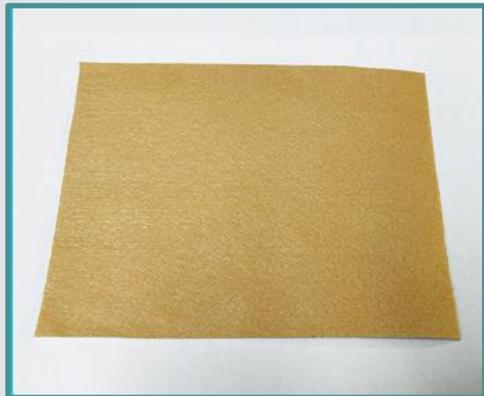

产品实拍



第一类医疗器械备案凭证

第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，
备案号：浙温械备 20170034 号。





日期：2017年09月05日

水刺无纺布

网纹设计

不留纤维

舒适更柔软

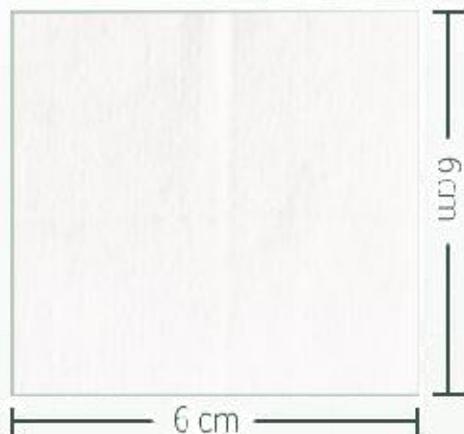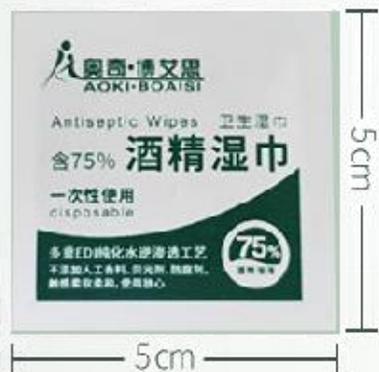

75%酒精湿巾

生活常备消毒杀菌想擦哪就擦哪

洁净整洁



在校学生
居家生活

公共交通
手机消毒

私家车辆
玩具清洁


办公环境
餐具清洁



大尺寸，一抹杀菌，高效清洁，
覆盖面积更广，随身携带的安全感

我们的湿巾VS市面上的湿巾

1片等于10片

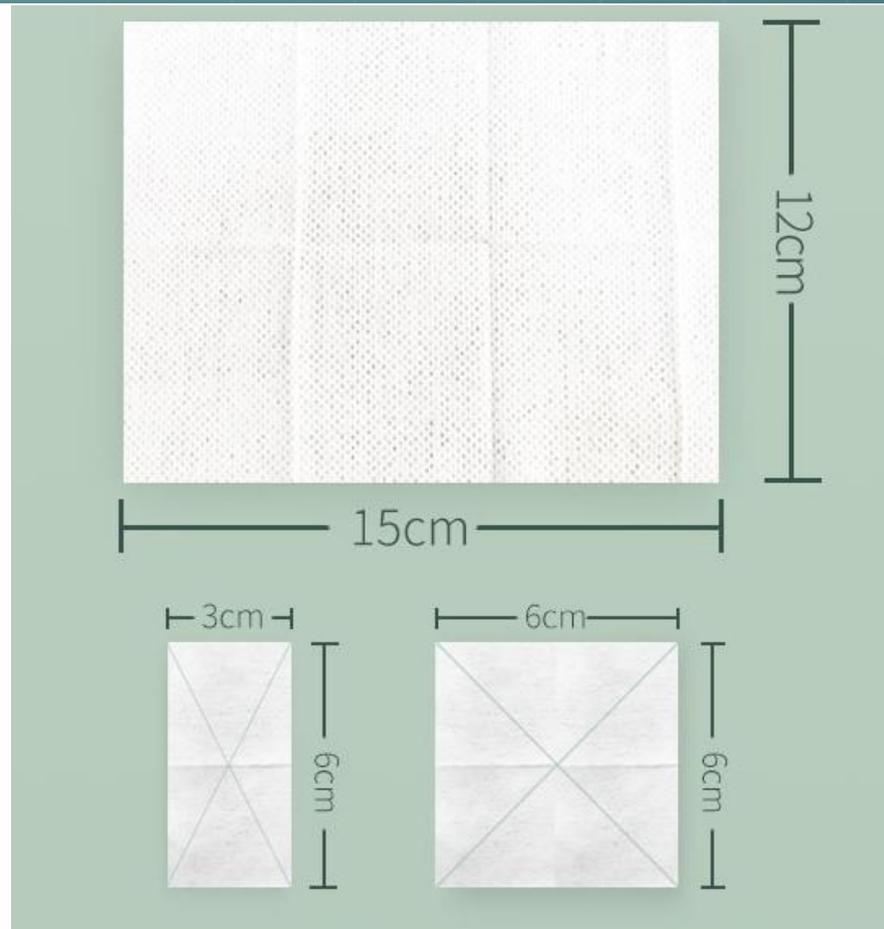

市面上常用的尺寸：3x6，6x6



一片一包，铝膜包装



正规厂家证件齐全

保证75%酒精浓度不造假



75%
酒精湿巾大号

生活常备消毒杀菌,多场合使用触手可及的洁净

手机消毒 公共交通 私家车辆 办公环境 居家生活



特大尺寸，覆盖面积更广，
一抹杀菌，随身携带的安全感。





正规厂家证件齐全

保证75%酒精浓度不造假



免缝胶带

减张胶带VS拉链式

01/黏贴平整



减张胶带

表面平整, 不会搁碰伤口



拉链式

有凸起, 不平滑
不方便日常生活 容易刮蹭

02/胶体不同



减张胶带

皮肤

压感性亚克力胶, 给予伤口
下压力, 无间隙贴合皮肤



拉链式

皮肤

一般胶体, 贴合不完整
伤口无胶体覆盖 无下压力

03/适用范围广



减张胶带

适合各种大小类型的伤口
根据伤口情况选择
使用数量及胶带间隔



拉链式

无法使用

尺寸固定 使用有局限性
手指关节处等小伤口无法使用

产品参数





产品名称：透气胶带

灭菌：EO灭菌

产品规格：


0.6*3.8cm、0.6* 10cm、0.3*7.5cm、
0.6*7.5cm、1.2*10cm

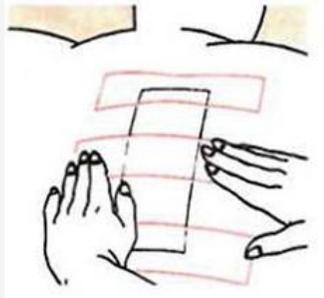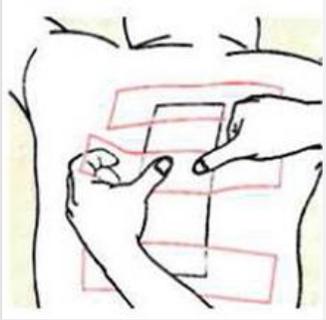

胶带粘贴

- 胶带粘贴部位必须清洁，干燥，无化学药剂或油脂以避免影响粘贴效果。
- 将胶带平放于粘贴处，使之于皮肤妥善帖覆，然后由胶带中央往两边用手指抹压胶带，保证胶带与皮肤粘贴处。
- 保证粘贴于皮肤上的胶带至少2.5厘米，以确保粘贴稳定。

注意事项

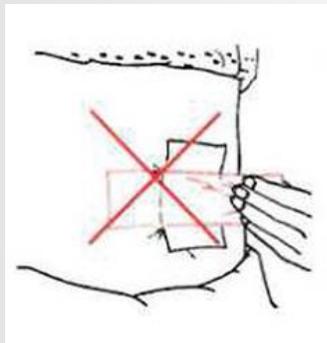

注意

- 胶带/敷料产品的更换频率应视具体应用而定,通常可留置3天以上,如果发现潮湿,松动,渗漏,污染等情况应及时更换。
- 胶带/敷料产品使用前需先按医院的操作规范清洗或消毒皮肤,待皮肤干燥后再粘贴。皮肤上如有清洁剂,润滑剂或抗菌软膏等会对粘贴效果带来影响。
- 禁忌先固定胶带的-端于皮肤表面,然后用力拉向对侧,在固定胶带的另一端,这样极易造成胶带粘贴部位皮肤产生例如红斑,水泡等张力性皮肤损伤。

第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：


根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，
备案号：浙温械备 20170034 号。





**多功能
防磨贴**

四大特点

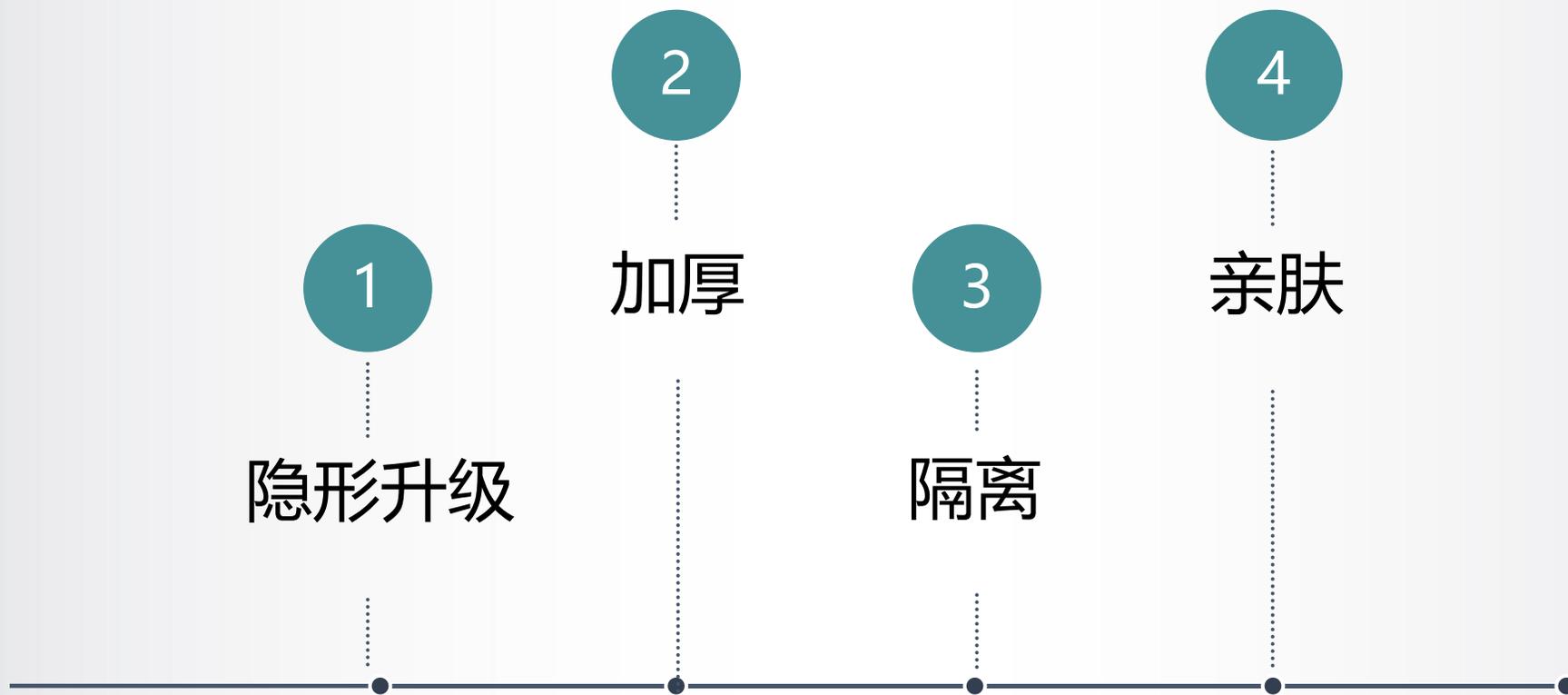

产品名称：泡沫足跟贴

特点：防磨/易撕/防水

适用：易磨损肌肤均可用

用途：用于脚跟/脚趾/脚踝/等皮肤易磨损部位防止磨擦起泡





剖腹产贴



剖腹产用

加厚吸水垫

德国胶粘剂

三大特点

1

剖腹产防水贴 洗澡可带

大尺寸10cm×25cm

Healthcare Medical waterproof of navel Comfortable breathe freely Paste the firm elastic breathe freely Paste the firm elastic of navel Comfortable freely



独立包装 环氧乙烷灭菌

环氧乙烷灭菌+GMP车间 双重保障

2



3

加厚亲肤 吸水垫

轻薄质感柔软亲肤



产品参数



品牌	奥奇博艾思	使用期限	2年
名称	无菌敷贴	包装	10片/包
产品规格	250*100MM		
生产编号	浙械注准20172641190		
适用范围	产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用,也可用于静脉输液导管的固定。		
生产厂家	浙江奥奇医用敷料有限公司		

使用方法 操作简单

使用更方便

6



1、打开包装, 揭开背面离型纸



2、护创垫对准伤口部位贴平并抚平



3、揭除背衬膜, 从中间往四周抚平贴合

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	苍南县龙港镇编织工业园区
生产地址	苍南县龙港镇编织工业园区
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	无菌敷贴
型号、规格	型号：A型、B型、C型；规格（单位：cm）： 4.4×4.4、5×5、5×5.7、5.4×6.4、6×7、6×9、7×8.5、 7.5×7.5、7×10、8×9、8.5×10.5、9×10、9×12、9×15、 9×20、9×25、9×30、9×35、9×40、10×10、10×11.5、 10×12、10×15、10×20、10×25、10×30、10×35、 10×40、11.5×12、15×15、15×20
结构及组成	A型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、离型纸（膜）组成。B型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成。C型产品由无纺布基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成或单独由吸水垫组成。
适用范围	产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：浙江省食品药品监督管理局


批准日期：2017年11月06日
有效期至：2022年11月05日

（审批部门盖章）

浙江省食品药品监督管理局
医疗器械注册证




//压疮分期不同，使用效果时间不同//

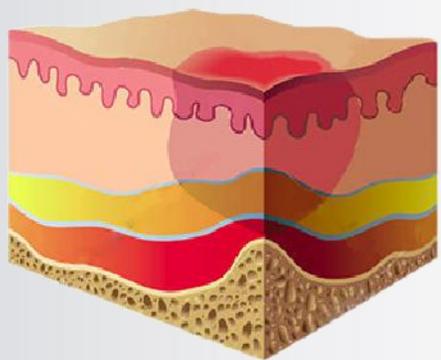


淤血红润期

压疮早期皮肤发红使用，可减少
减少对皮肤的压力，预防伤口溃
疡无渗液5-7天更换一次

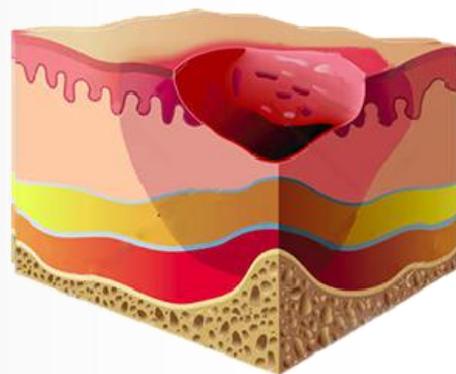


炎性浸润期

减少摩擦，保护伤口，避免受
感染，无渗液5-7天更换一次，
有渗液视情况吸满后更换

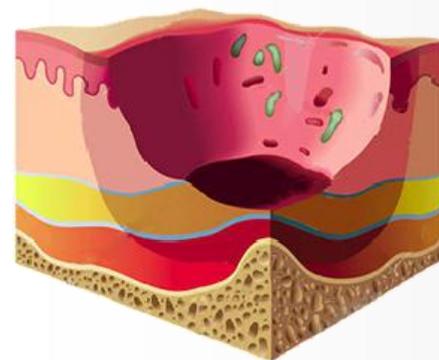


浅度溃疡期

吸收渗出液，防止感染扩
展，为伤口愈合提供良好环境，
天更换一次

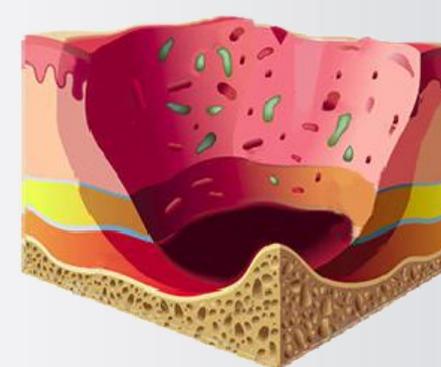

坏死溃疡期

吸收渗出液，防止感染扩
展，为伤口愈合提供良好环境，
天更换一次

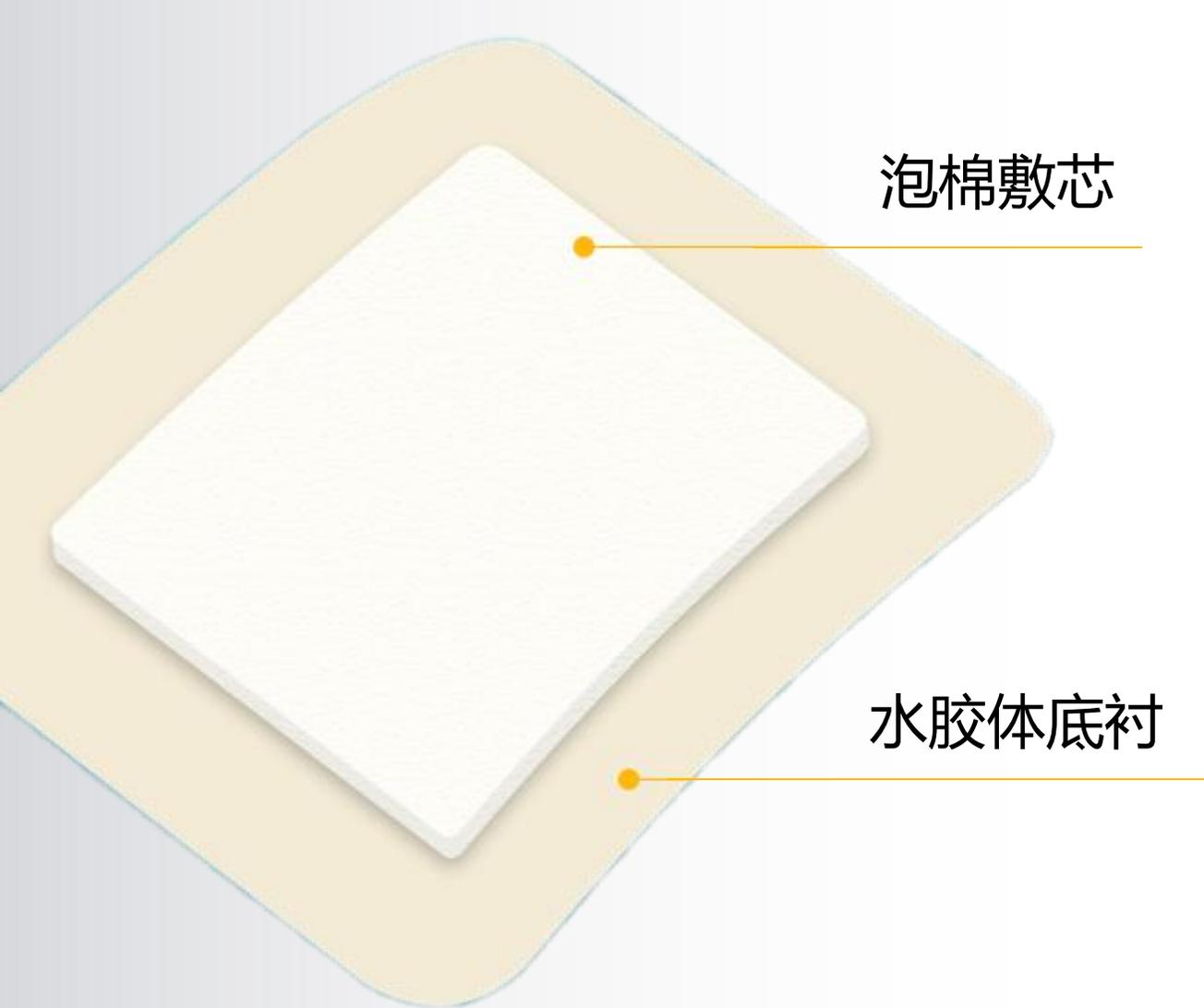


加厚
敷芯

17倍
吸水


亲肤
透气

EO
灭菌

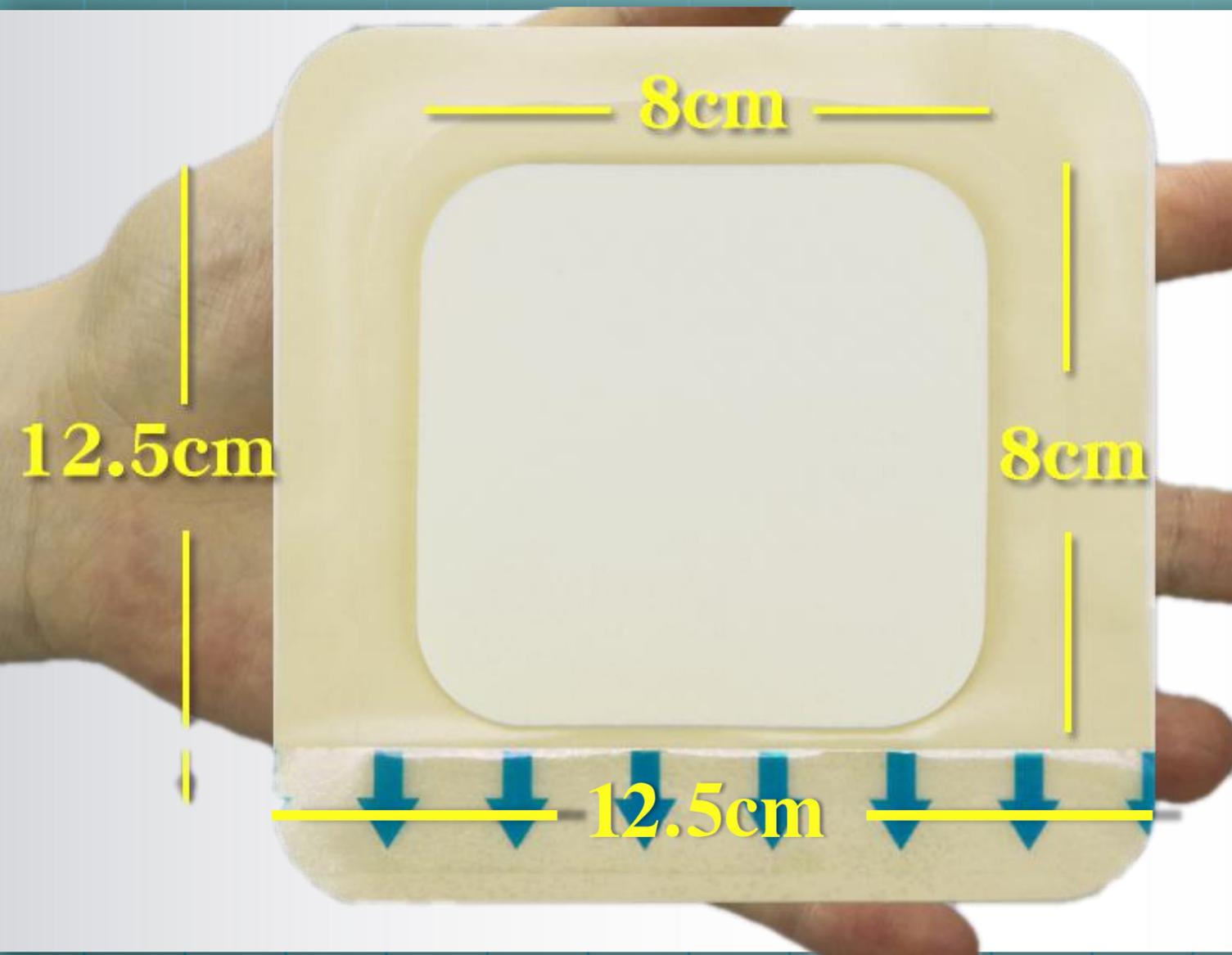

尺寸参数

产品细节

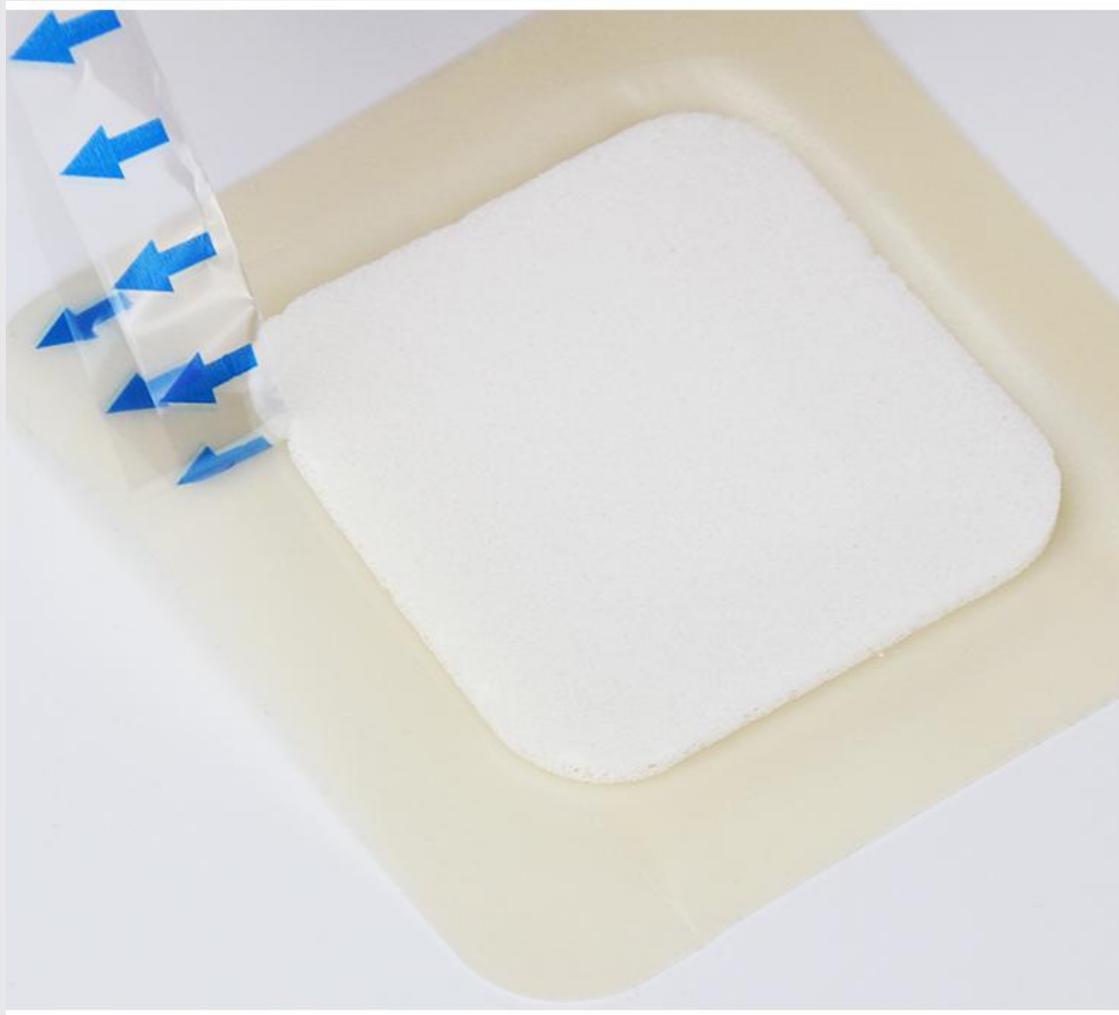

第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170026号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械变更：创口贴予以备案，备案号：浙温械备 20170026 号。

温州市市场监督管理局

(盖章)

备案专用章

日期：2019年01月23日



三伏贴

适用场景



三伏穴位贴



肚脐贴



贴脚底



高品质三伏贴呵护您

采用无纺布透气性好

HIGH QUALITY THREE-VOLT PATCH

NON-WOVEN FABRICS HAVE GOOD AIR PERMEABILITY



01 防渗漏胶圈
防水防渗漏不污染衣服







02 粘性足 低过敏
采用德国汉高胶粘剂



03 易撕条易撕 不伤皮肤
采用德国汉高胶粘

产品参数

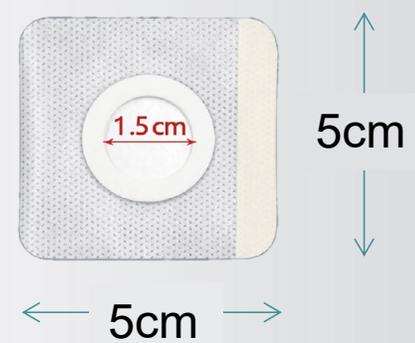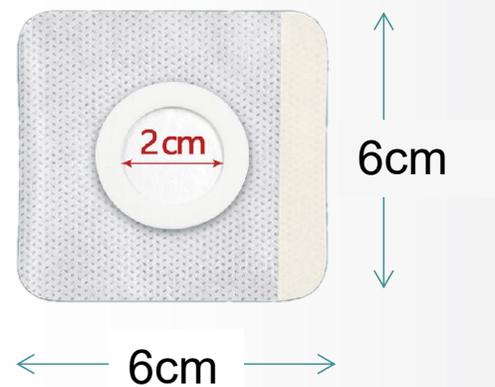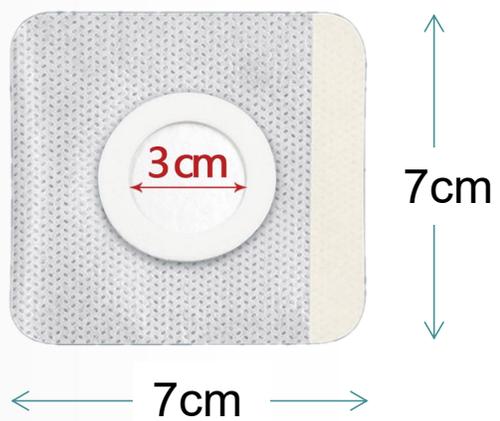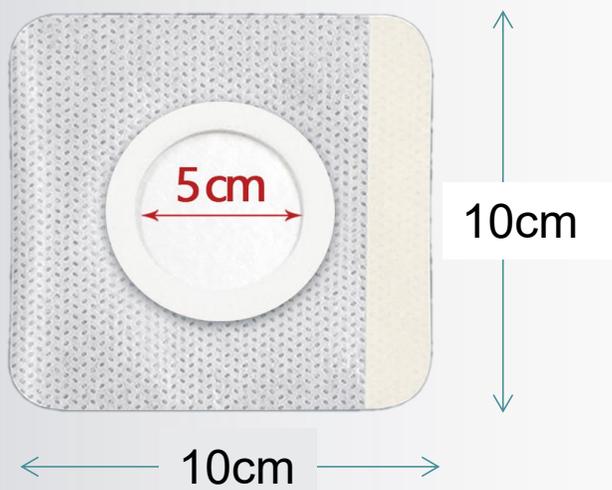

产品细节



第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，

备案号：浙温械备 20170034 号。



日期：2017年09月05日



水胶体足跟贴

擦伤，生活中磕磕碰碰免不了

保护伤口方便携带



脚部擦伤



脚后跟擦伤




膝盖擦伤



脚背擦伤

使用步骤

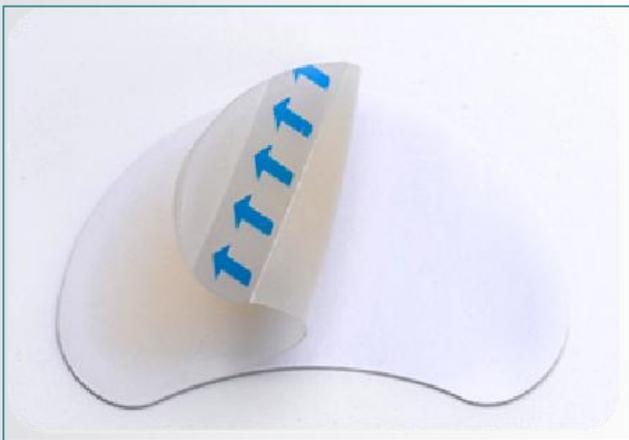

1、按箭头指示，轻轻撕开部分水泡贴保护层。



2. 水性水胶体敷贴中心对准伤口处，固定端，然后撕开另一侧透明膜。



3、将水泡贴贴在皮肤上，手指轻按固定。



4、完成步骤修复水泡，呵护你的皮肤。

超薄，更纤巧

弧形薄边设计，紧实贴服肌肤

边缘0.1mm


中间1mm

中间1mm，边缘仅0.1mm




超温润 更舒适

为伤口提供温润的疗愈环境，防水防菌

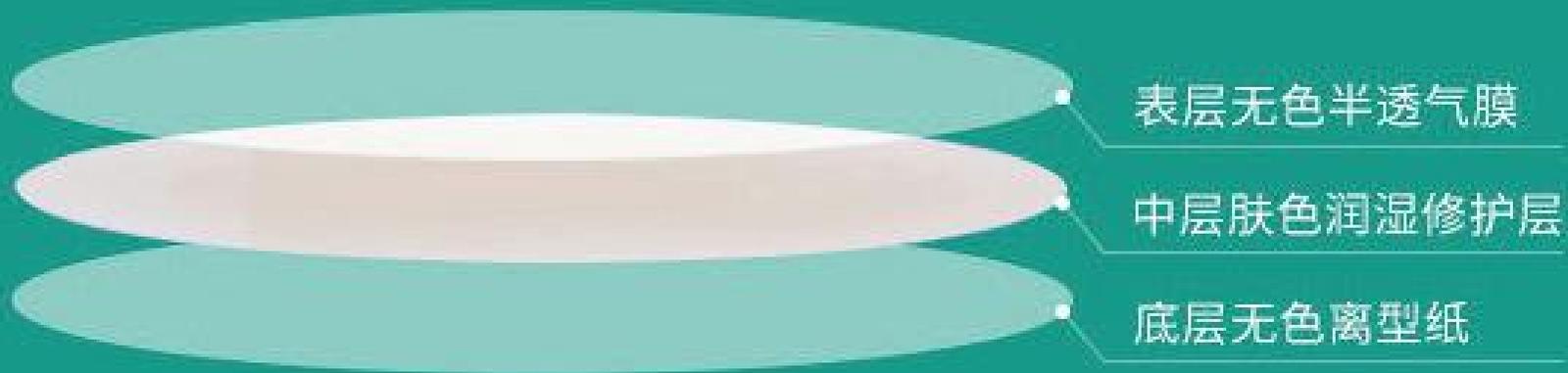

产品细节

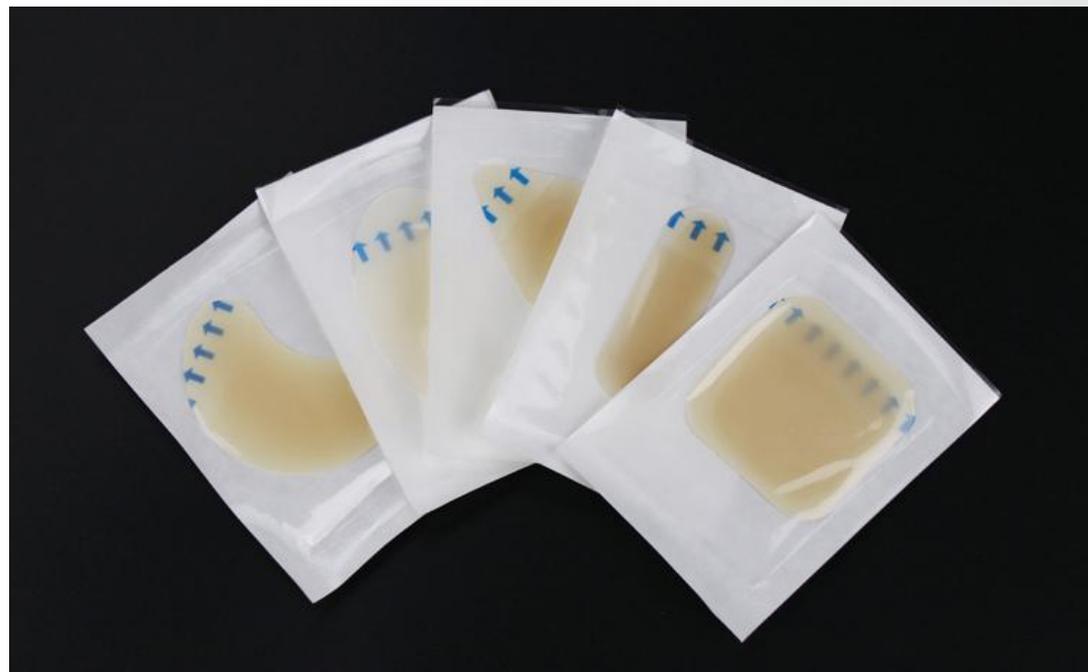

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641036号

中华人民共和国医疗器械注册证


注册证编号：浙械注准20172641036

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	苍南县龙港镇编织工业区
生产地址	苍南县龙港镇编织工业区
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	一次性使用水胶体敷贴
型号、规格	E型 (E101、E102、E103、E104、E105、E106、E107、E108、E109、E110、E111、E112、E113、E114、E115、E116、E117、E118、E119、E120、E121、E122、E123、E124、E125)。
结构及组成	产品由聚氨酯 (PU) 膜、压敏胶、水胶体、离型纸组成。水胶体成份为羧甲基纤维素钠 (CMC) 40%、压敏胶60%，占总质量分数为 (80±10)%。
适用范围	产品用于体表无渗出液或有轻微渗出液的伤口护理。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：浙江省食品药品监督管理局

批准日期：2017年09月04日
有效期至：2022年09月04日



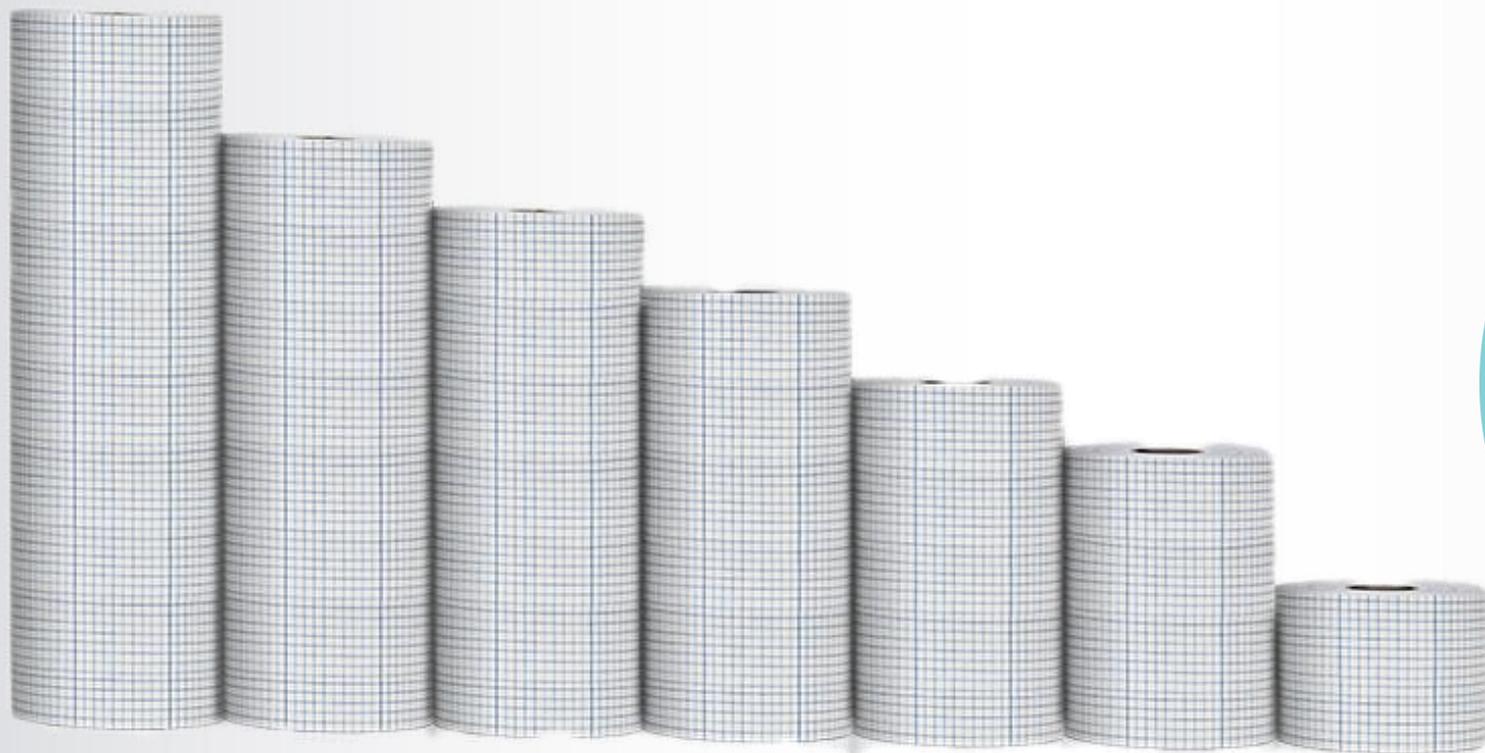

无纺布胶带

适用场景

固定足贴 ▷



固定针头 ▷



◁ 固定膏药



◁ 固定纱布



◁ 紧急包扎



六大特点


1 优质医用胶

粘性强,不易留胶,不翘边易撕



2 S型切口 方便揭开

正面采用1cm*1cm方格设计,精确裁剪
S形切口设计,使用方便,不留残胶在皮肤.

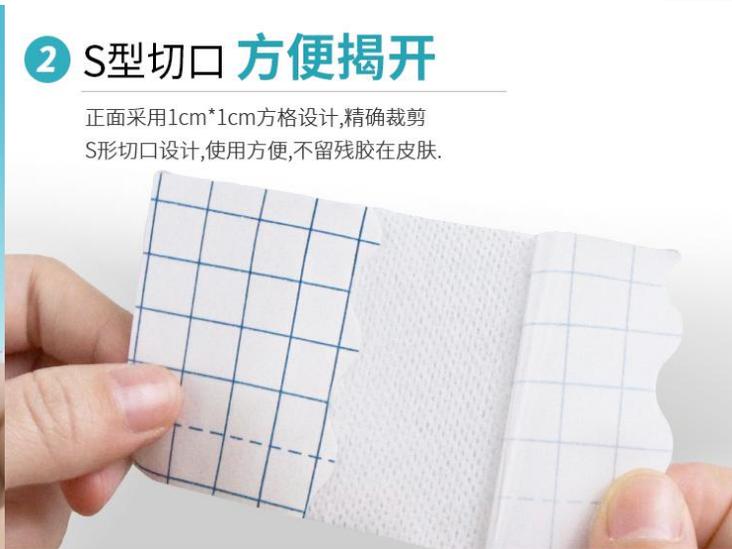

3 透气型-多孔透气

水刺无纺布,微孔结构,透气性好长时间
贴敷,不闷皮肤。




4 高黏度 不散胶

粘性强,不易留胶



5 随意裁剪 使用方便

人性化设计每格1cm

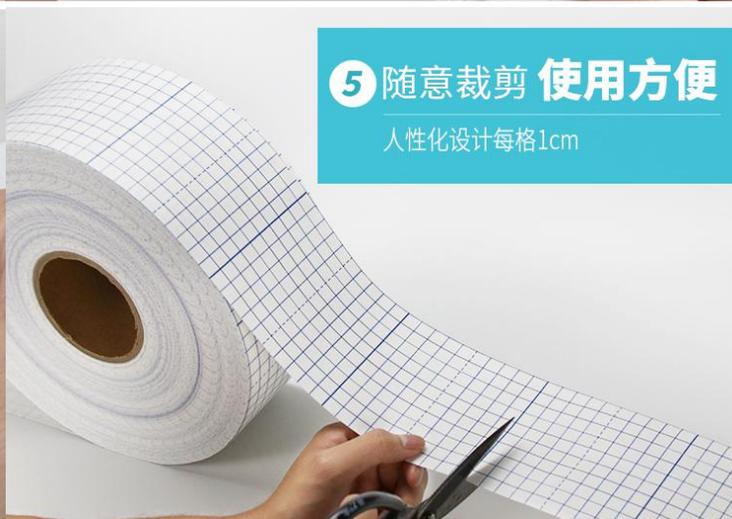

6 固定各类辅料

固定各种膏药(黑膏药,白膏药)固定纱布块针头等.




产品名称 无纺布胶带

产品规格

片装: 8cm*8cm、 10cm* 10cm、 10cm* 12cm、 12cm* 12cm、 12cm* 16cm 、
13cm* 15cm、 15cm* 15cm、

卷材: 5cm* 10m、 8cm* 10m、 10cm* 10m、 12cm* 10m、 13cm*10m、 15cm* 10m、
20cm* 10m 5cm* 100m、 8cm* 100m、 10cm* 100m、 12cm* 100m\13cm* 100m、
15cm* 100m、 20cm* 100m

适用范围 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。

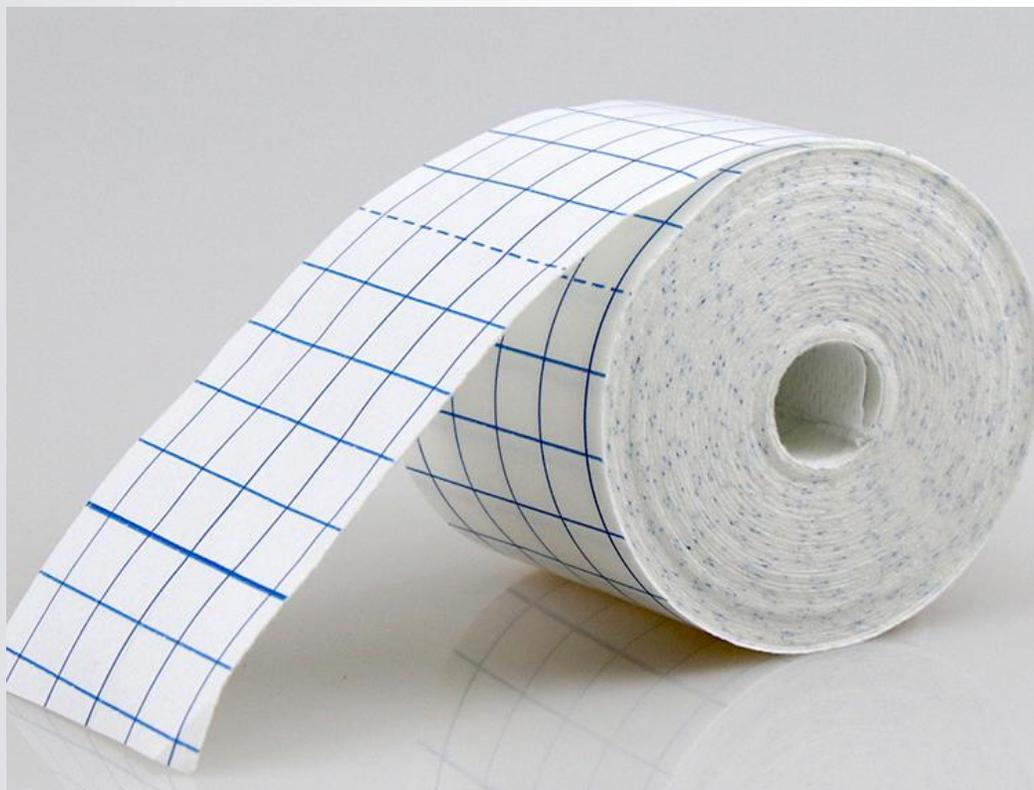

第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，
备案号：浙温械备 20170034 号。



日期：2017年09月05日



无菌敷贴防水款

适用场景



洗澡可带



运动游泳



保护伤口



宝宝贴肚脐


1 防水型敷贴 洗澡可带

采用优质透明防水PU 薄膜基材



2 透气亲肤 不闷汗

水刺无纺布材质 贴合度好

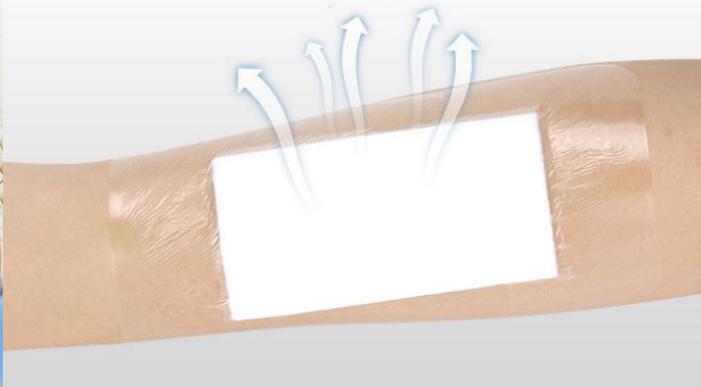

3 圆角设计 不易卷边

粘贴更牢固




4 高黏度 不散胶

粘性强,不易留胶



德国汉高胶

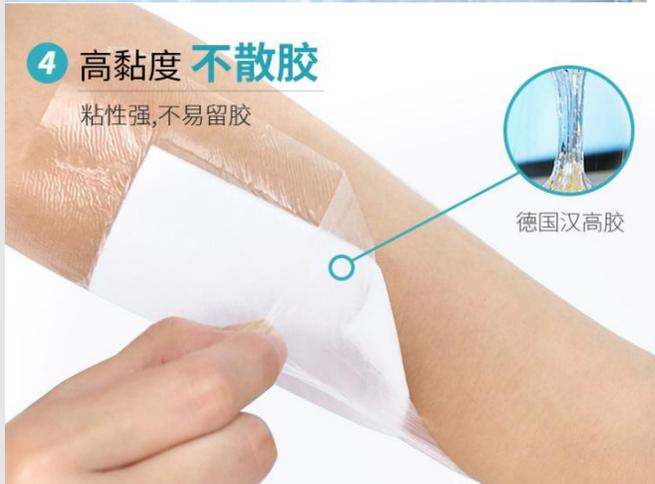

5 可做肚脐贴(6*7cm)

透气亲肤




6 剖腹产贴(10*25cm)

适用于大创伤



使用步骤

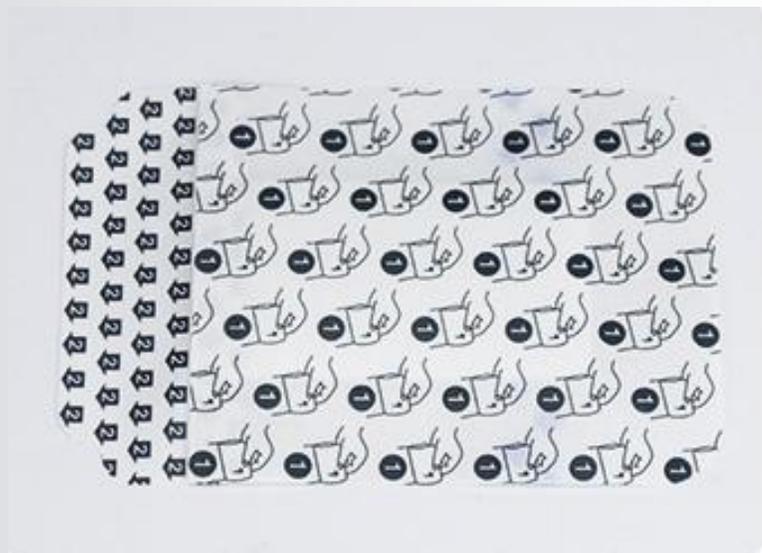

打开独立包装 取出无菌敷贴



撕开背贴贴合在创口处




最后撕去离型纸



20-40片纸盒装



独立密封包装

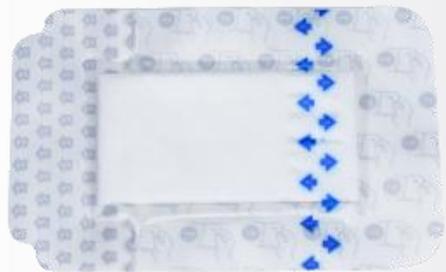

绵柔亲肤网面

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	苍南县龙港镇编织工业园区
生产地址	苍南县龙港镇编织工业园区
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	无菌敷贴
型号、规格	型号：A型、B型、C型；规格（单位：cm）： 4.4×4.4、5×5、5×5.7、5.4×6.4、6×7、6×9、7×8.5、 7.5×7.5、7×10、8×9、8.5×10.5、9×10、9×12、9×15、 9×20、9×25、9×30、9×35、9×40、10×10、10×11.5、 10×12、10×15、10×20、10×25、10×30、10×35、 10×40、11.5×12、15×15、15×20
结构及组成	A型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、离型纸（膜）组成。B型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成。C型产品由无纺布基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成或单独由吸水垫组成。
适用范围	产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：浙江省食品药品监督管理局

批准日期：2017年11月06日

有效期至：2022年11月05日

（审批部门盖章）



环氧乙烷灭菌

浙食药监械生产许20140076号



无菌敷料防水透气款

适用场景



术后创口用



敷药适用



脚底适用



可做乳贴使用

1 环氧乙烷灭菌

浙食药监械生产许20140076号



2 透气亲肤不闷汗

水刺无纺布材质 贴合度好



3 圆角设计不易卷边

粘贴更牢固



4 高黏度不散胶

粘性强,不易留胶



5 可做肚脐贴(6*7cm)

透气亲肤




6 剖腹产贴(10*25cm)

适用于大创伤




敷贴实拍尺寸对比

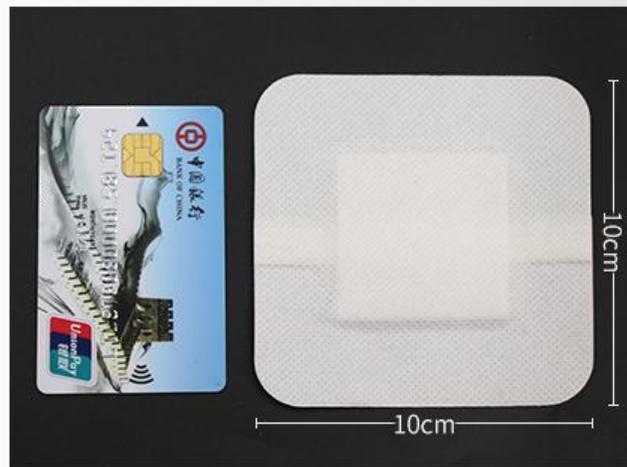



产品细节

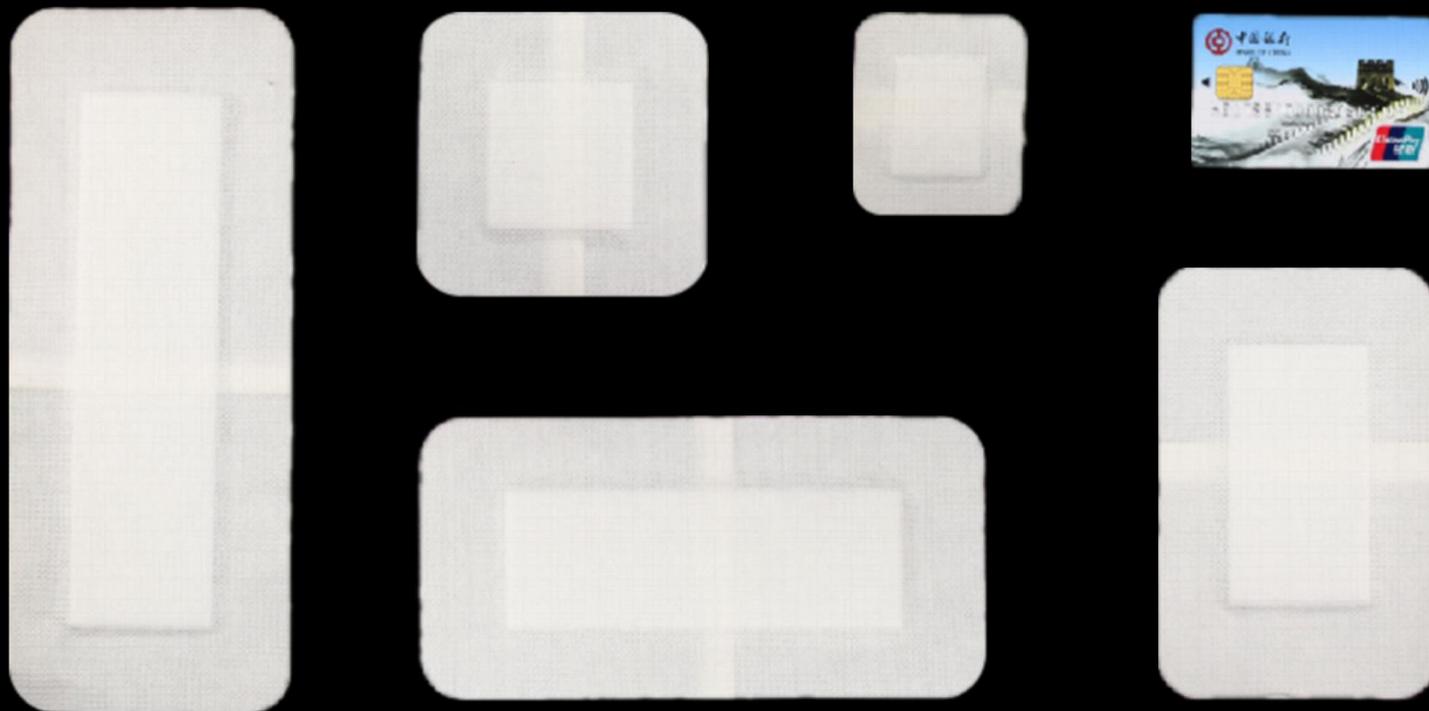

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	苍南县龙港镇编织工业园区
生产地址	苍南县龙港镇编织工业园区
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	无菌敷贴
型号、规格	型号：A型、B型、C型；规格（单位：cm）： 4.4×4.4、5×5、5×5.7、5.4×6.4、6×7、6×9、7×8.5、 7.5×7.5、7×10、8×9、8.5×10.5、9×10、9×12、9×15、 9×20、9×25、9×30、9×35、9×40、10×10、10×11.5、 10×12、10×15、10×20、10×25、10×30、10×35、 10×40、11.5×12、15×15、15×20
结构及组成	A型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、离型纸（膜）组成。B型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成。C型产品由无纺布基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成或单独由吸水垫组成。
适用范围	产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：浙江省食品药品监督管理局

批准日期：2017年11月06日
有效期至：2022年11月05日

（审批部门章）





一次性口罩

一次性防护口罩

高率低阻 | 阻挡飞沫 | 立体防护



产品参数

产品名称
一次性使用口罩

产品规格
50片/盒

产品颜色
蓝色.


尺寸
175mm X95mm

包装方式
非独立包装

有效期
三年(见包装)

材质
3层无纺布

产品信息 Product Information

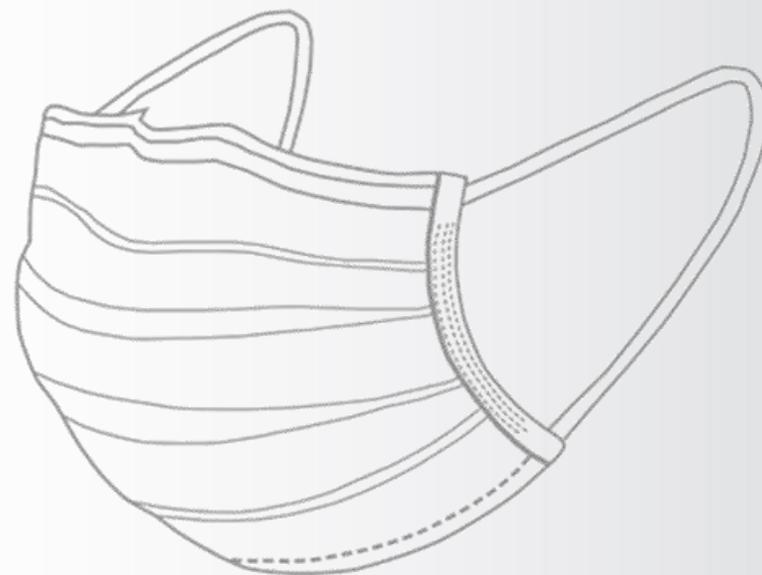

产品细节





Certification of FDA Registration Service

This document provides notification of the registration number assigned to the client's establishment.
 Establishment: ZHEJIANG AOKI MEDICAL DRESSING CO., LTD
 Address: LONGANG PIASTIC KNITTING INDUSTRIAL ZONE,
 WENZHOU , ZHEJIANG , 325802 , CHINA
 Owner/Operator No.: 10030859
 Registration No.: 3008044603

Listing No.	Premarket Submission No.	Product Codes	Device Name	Proprietary Name	Activities
D255840	Exempt	FON	BAG, DRAINAGE, WITH ADHESIVE, OSTOMY		Manufacturer
D087859	Exempt	NAB	Gauze/sponge, nonresorbable for external use		Manufacturer Contract Manufacturer
D087327	Exempt	LYU	ACCESSORY, SURGICAL APPAREL	Face mask, Flat type/ Folding type	Manufacturer Contract Manufacturer
D087326	Exempt	KGX	Tape and bandage, adhesive		Manufacturer Contract Manufacturer
D087329	Exempt	KYR	BAG, ICE		Manufacturer Contract Manufacturer
D087328	Exempt	NAC	Dressing, wound, hydrophilic		Manufacturer Contract Manufacturer
D087331	Exempt	HMP	PAD, EYE		Manufacturer Contract Manufacturer
D087332	Exempt	NAD	Dressing, wound, occlusive		Manufacturer Contract Manufacturer
D087330	Exempt	JOK	SCISSORS, MEDICAL, DISPOSABLE		Manufacturer Contract Manufacturer
D087335	Exempt	NAE	Dressing, wound, hydrogel w/out drug and/or biologic		Manufacturer Contract Manufacturer
D087336	Exempt	KGY	BAG, DRAINAGE, WITH ADHESIVE, OSTOMY		Manufacturer Contract Manufacturer

Technical Documentation No.: AOKICE-TCF-01

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: **Zhejiang Aoki Medical Dressing Co., Ltd**
 Plastic Knitting Industrial Zone, Longgang city, Wenzhou 325802, P.R.China.

whose single Authorized EU-Representative:
Name: Caretechion GmbH
 Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Duesseldorf, Germany
 Tel: +49 211 3003 6618
 DEMDI Code: DE/0000048026
 E-mail: info@caretechion.de

We, the manufacturer, herewith declare that the products:
Medical Face Masks

meet the provisions of Medical Device Regulation (EU) 2017/745 which apply to them.

The medical device has been assigned to class I according to Appendix VIII of the Regulation (EU) 2017/745. It bears the mark



following the conformity assessment procedures relating to the EC Declaration of Conformity set out in Annex IX of Regulation (EU) 2017/745.

This Declaration of Conformity covers all medical devices as specified in the product list belonging to this declaration.

The product identified above complies with the essential requirements of the above EC Directives by meeting the following standards:

*EN 14683: 2019; EN ISO 13485:2016; EN ISO 14971:2012; EN ISO 10933-1:2018;
 EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2013; EN 62366-1:2015;
 EN ISO 15223-1:2016; EN 1041:2008+A1:2013*

The above mentioned declaration of conformity is exclusively under the responsibility of

Zhejiang Aoki Medical Dressing Co., Ltd
 Plastic Knitting Industrial Zone, Longgang city, Wenzhou 325802, P.R.China.

2020.03.27
Place, date





一次性造口袋

60%造口人经历过造口周围皮肤问题


为此深受折磨，痛扰不堪

过敏

红肿

溃烂

渗漏 ...

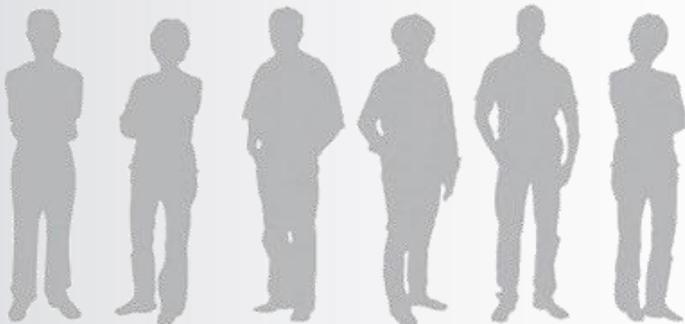

造口用品理塑带



皮肤清洁片



皮肤保护膜



造口明刀




适口护肤粉



造口用品夹子

产品参数

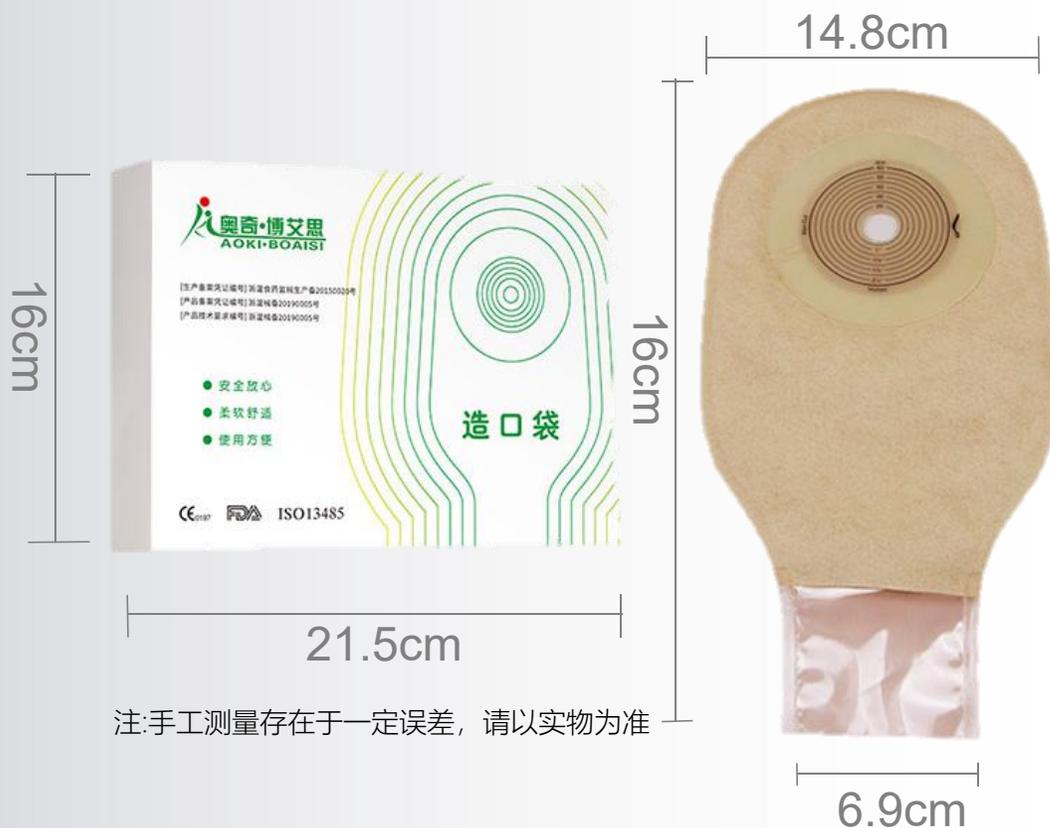

产品名称 一次性造口袋开口

产品型号 M124(网纹膜)M111(平纹布)

备案号 浙温械备20190005号

有效期 3年

适用范围 本产品主要用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理


产品规格 10个/盒

颜色 肤色半透明



产品名称: 件式闭口袋
产品型号: M224
材质: 网纹膜
包装: 10个/盒
颜色: 肤色半透明
规格: 连接环径60mm
剪孔: 15-60mm

产品包装盒

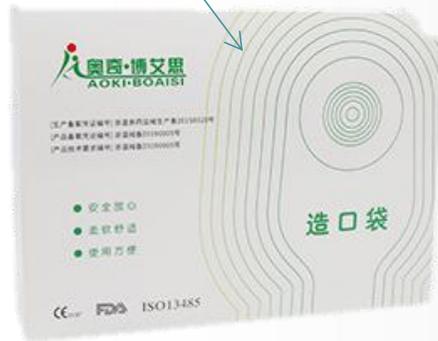

博艾思”一件式闭口造口袋



使用说明书



道口测量尺





医药收纳盒

可自由组合分格

随心调节移动档板自由调整



贴心提手

提手设计提取更方便



加高底部 防滑耐磨

底部防滑设计 凹槽防止滑动



密封卡扣

防尘防潮湿密封性能好



分隔分层 巧用空间

提手设计安全锁扣-顶盖
分格可拆分可放应急药物-内层
大容量可放瓶状大体积等药物-箱体



产品参数

产品名称：
手提式双层药箱

颜色分类：
粉色/黑色

材质：
PP

用途：
收纳药箱

尺寸规格：

粉色:23.5x13.5x15cm 黑色:20x12x12.5cm



产品细节



第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带予以备案，
备案号：浙温械备 20170034 号。



日期：2017年09月05日



医用透气胶带

透气胶带可用于手指、手腕、腿部等，是您的常备品



导管固定



手术创绊



固定纱布



家庭常备单品

六大特点

为什么选择博艾思压敏胶带?



①低过敏 更亲肤

采用优质胶布材料、降低过敏度、肌肤更舒适



②易撕免剪

使用方便, 断口平整, 易撕断



③透气胶带

透气舒适, 贴近皮肤不担心



④延展性

用于伤口纱布的固定作用、关节指甲等活动部位亦放心想用
随时裁剪



⑤高黏度 不散胶

采用德国汉高胶粘剂、粘度好



⑥尺寸齐全

产品齐全规格, 适应不同人群的需求

产品特点

透明无纺布材质,透气、服帖、舒适, 无需裁剪,有效利用不浪费, 操作方便、粘性好, 固定力强。


使用范围

用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力,以起到固定作用。

材质

无纺布、德国汉高胶粘。



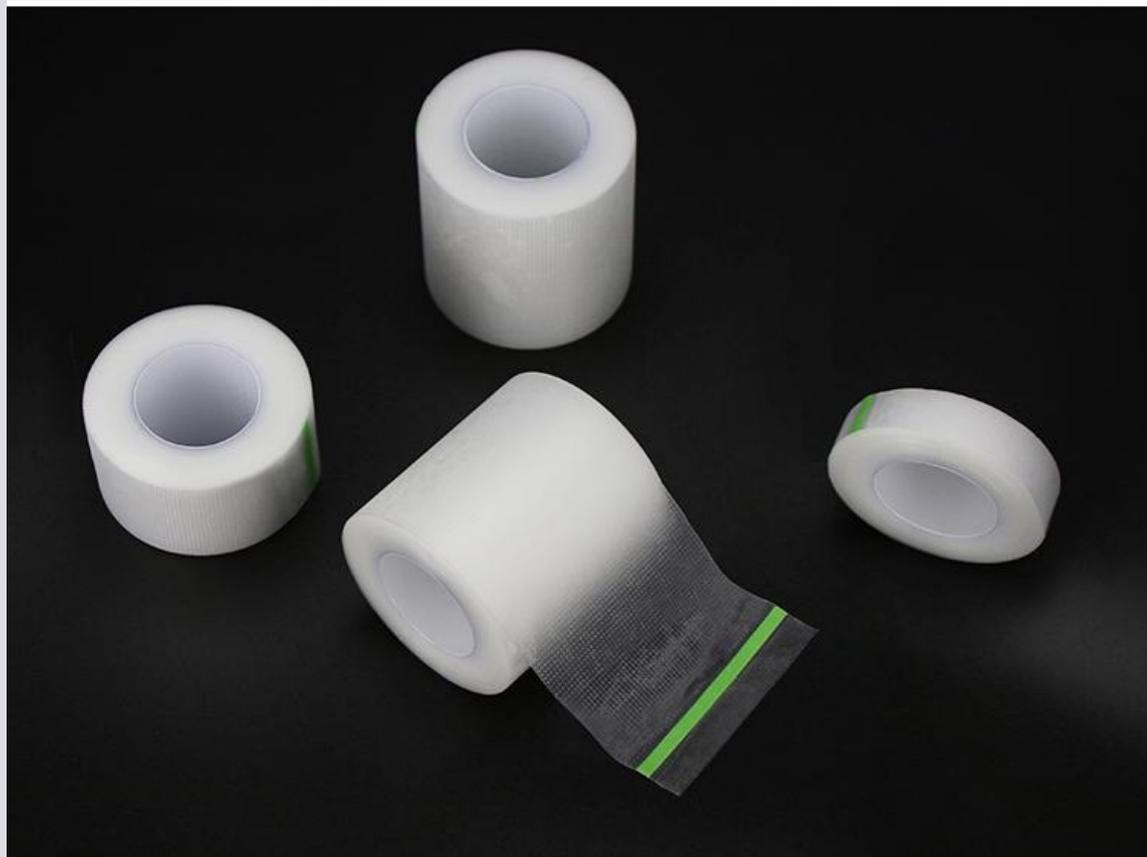



医用外科口罩

关键时刻 您的防护选择

防飞沫接触 防病毒病菌 防雾霾粉尘



防飞沫接触
Anti droplet contact



防病菌病毒
Antiviral



防霾防粉尘
Anti haze and dust

产品参数

产品名称

医用外科口罩

产品规格

10只/袋

注意事项

本产品为一次性使用，用后销毁

有效期

见外包装

使用范围

适用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障

注意事项

请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买使用



注:所有尺寸为手工测量,存在一定误差



三层滤芯

99.9% 过滤效率

花粉/病毒/霉菌孢子/PM2.5/烟雾颗粒/石棉/重金属颗粒

三层过滤技术, 拒绝“细菌病毒”

拉松三层滤芯。高效阻隔, 99.9%过滤

阻隔病原体微生物、颗粒物等

有效过滤细菌 $\geq 99.9\%$



械字号药监备案

正品保证 使用更放心

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20202141353

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	浙江省温州市龙港市编织工业园区
生产地址	浙江省温州市龙港市世纪大道603弄4幢（温州澜宇实业有限公司厂房5层）
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	医用外科口罩
型号、规格	型号：非无菌耳挂式。规格：17.5cm×9.5cm和14.5cm×9.5cm。
结构及组成	产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。
适用范围	用于覆盖在使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。
附件	本产品执行YY0469-2011《医用外科口罩》标准（除4.8阻燃性能、4.9.2无菌（不适用）、4.10环氧乙烷残留量（不适用）和4.11皮肤刺激性、4.12细胞毒性、4.13迟发型超敏反应外）。
其他内容	/
备注	1、本产品为防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急审批产品，注册证有效期为6个月，产品标签和说明书上应醒目标注“仅供防控疫情应急使用”。2、每批产品出厂应当检验合格，并附出厂检验报告。出厂检验项目应至少包括YY 0469-2011《医用外科口罩》中的如下要求：4.1外观、4.2结构与尺寸、4.3鼻夹、4.4口罩带、4.5合成血液穿透、4.6过滤效率、4.7压力差、4.9.1微生物指标。3、产品如按《商务部 海关总署 国家药品监督管理局关于有序开展医疗物资出口的公告》（2020年第5号）出口，企业应当到市级市场监督管理局办理出口备案（可网上办理），并到浙江省药品监督管理局办理产品出口销售证明（可网上办理）。

审批部门：浙江省药品监督管理局

批准日期：2020年05月21日
有效期至：2020年11月21日





婴儿肚脐贴

保护脐带伤口愈合



宝宝刚出生时，剪掉的脐带如护理不当，将成为病原侵入人体的重要途径，因此必须做好宝宝脐部的护理，每次洗澡都要贴上护脐贴，防止伤口沾水。

※脐带自然脱落后-星期内需要继续使用，以防发炎。

游泳训练时,避免病原入侵



0~3岁的宝宝进行游泳训练开发锻炼时,需要使用护脐贴的。宝宝肚脐比较脆弱，容易遭受到病原入侵,所以千万不要因为宝宝有些大了或者图省事，就不给贴护脐贴了,这是非常的危险。

接种疫苗时,保护针口不碰水



接种疫苗时保护针孔不碰水宝宝人出生起就要多接种疫苗每打针后针1-2天不能碰水。


有小伤口时, 当止血贴急用



宝宝磕着绊着常有的事，万一家里止血贴用了,护脐贴也可以来救场,伤口消毒后贴上可保护伤口,比让伤口干晾着强多了。

防水透气 肌肤也要呼吸

比创口贴更防水 更透气 不闷肌肤
PU透气底膜 柔韧隔污不易破

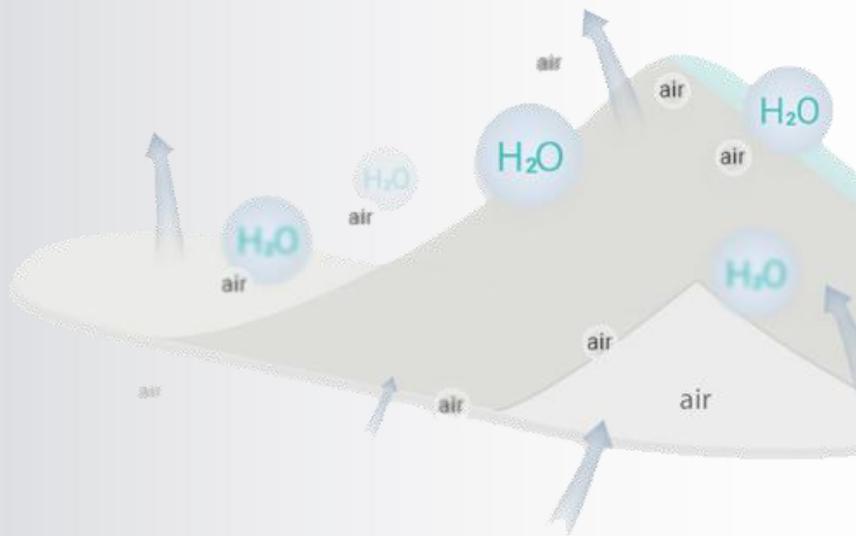

好撕易揭 不伤肤

采用德国汉高胶, 亲柔贴肤, 不易伤害宝宝肌肤

水刺无纺布材质 贴合度好


圆角设计不易卷边

透气亲肤 不闷汗

高黏度, 不散胶 粘性强
不易留胶


规格/尺寸/包装

- 品名：护脐贴
保质期：3年
装灭菌方式：臭氧消毒
规格：6X7cm1片
10片/盒防水型
10片/盒日常护理

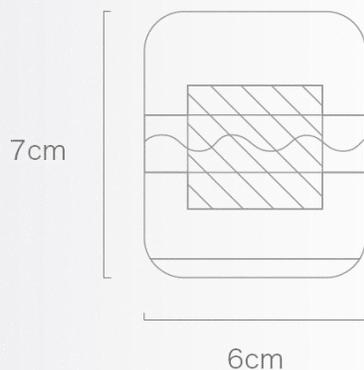



10片纸盒装

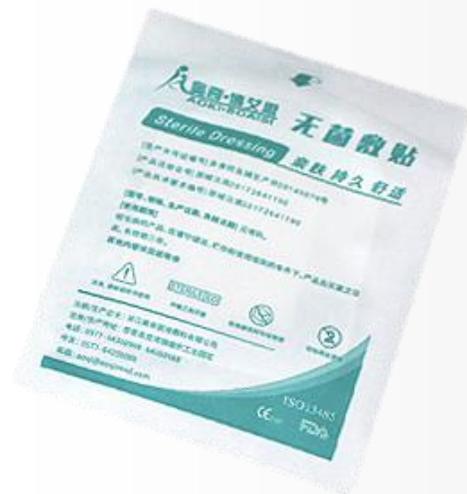

独立密封包装



绵柔亲肤网面

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20172641190

注册人名称	浙江奥奇医用敷料有限公司
注册人住所	苍南县龙港镇编织工业园区
生产地址	苍南县龙港镇编织工业园区
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	无菌敷贴
型号、规格	型号：A型、B型、C型；规格（单位：cm）： 4.4×4.4、5×5、5×5.7、5.4×6.4、6×7、6×9、7×8.5、 7.5×7.5、7×10、8×9、8.5×10.5、9×10、9×12、9×15、 9×20、9×25、9×30、9×35、9×40、10×10、10×11.5、 10×12、10×15、10×20、10×25、10×30、10×35、 10×40、11.5×12、15×15、15×20
结构及组成	A型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、离型纸（膜）组成。B型产品由聚氨酯（PU）复合膜基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成。C型产品由无纺布基材、胶粘层、吸水垫、离型纸（膜）组成或单独由吸水垫组成。
适用范围	产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：浙江省食品药品监督管理局

批准日期：2017年11月06日
有效期至：2022年11月05日

（审批部门盖章专用）





造口用品夹子

七层阻隔膜

袋体阻隔性薄膜,防止异味, 透明设计易于观察造口及排泄物状态,不易漏。





博艾思用实力说话

荣誉展示，因为专注，所以专业





自帶彈性綁帶

自粘绷带可用于手指、手腕、肩部、腿部等是您的运动常备品



健康锻炼



篮球运动



户外运动



医用绷带



登山游玩



宠物医院

六大特点

弹性绷带 让你不再错过实用好物




①微孔透气 优质选材
透气排湿排汗
佩戴舒适更亲肤



②高弹性
提供可调节束缚力
可伸拉三倍
适合个部位包扎
束缚力起到固定、包扎作用



③轻松手撕 方便快捷
不用剪刀即可轻松撕取

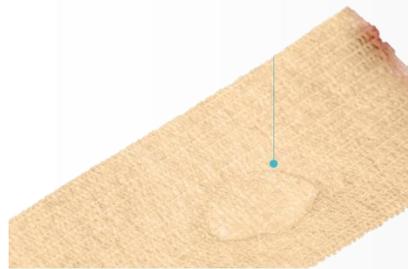

④可生活防水防溅
遇水或出汗不会影响其粘性
遇水不易脱落
持久粘性



⑤弹性十足 舒适不紧绷
四周弧形设计不易翘边不易脱落
能巧妙的和皮肤贴合



⑥柔软材质
利于皮肤汗液蒸发
无纺布又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成因具有布的外观和某些性能而称

产品参数

使用说明: 用于对创面散料或肢体提供束缚力, 以起到包扎固定作用

生产厂家: 浙江奥奇医用敷料有限公司

生产地址: 苍南县龙港镇编织工业园区

贮存方法: 湿度不大于80%,无腐蚀性 气味和通风良好的清洁室内

产品规格: 2.5CM*450CM/5X450CM/7.5X450CM/10CM*450CM



产品参数: Product Parameter

产品名称: 弹性绷带

适用范围: 本产品主要供医疗机构做包扎。固定等一次性使用

注意事项: 一次性使用,严禁重复使用。

包装规格: 1卷



5x 450cm
手指、脚趾

7.5x 450cm
腕部、膝盖

高品质弹性绷带呵护您

HIGH QUALITY ELASTIC BANDAGE PROTECTS YOU

高品质自粘弹性绷带|自粘高弹低过敏

第一类医疗器械备案凭证

备案号：浙温械备20170034号

第一类医疗器械备案凭证

浙江奥奇医用敷料有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：自粘弹性绷带予以备案，
备案号：浙温械备 20170032 号。

温州市市场监督管理局



日期：2017年09月05日

A large, stylized stethoscope graphic is positioned across the top and right sides of the slide. The top part of the stethoscope is on the left, with the earpieces pointing towards the top right. The tubing curves around the right side of the slide, ending in the chest piece which is located in the bottom right corner. The background features a light blue grid pattern.

你我同心 健康同行

感谢您的观看指导

The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field

2020.7.27

浙江奥奇医用敷料有限公司